

เรียนลูกค้า
ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เรามีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดสำหรับการใช้งานในด้านความร้อน น้ำหนัก ความมั่นคงปลอดภัย อุ่นหุ้มของร่างกายและชีพจร การบำบัดอย่างอ่อนโยน การนวด ความงาม และอากาศ

ขอแสดงความนับถือ
Beurer



อ่านคำแนะนำการใช้งานเหล่านี้อย่างระมัดระวังและเก็บไว้ใช้ในภายหลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ทำให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าถึงได้ และสังเกตข้อมูลที่มีอยู่

คำเตือน

- อุปกรณ์นี้มิได้สำหรับใช้งานส่วนตัวภายในบ้าน ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์
- อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
- เก็บอุปกรณ์ให้พ้นมือเด็ก
- ตรวจสอบอุปกรณ์ และสายไฟก่อนการใช้งานทุกครั้ง ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหาย ให้งดการใช้งาน
- อุปกรณ์ และสายชาร์จไม่ควรเปียกน้ำ
- อย่าใช้อุปกรณ์ใกล้อ่างอาบน้ำ, อ่างล้างหน้า, ฝักบัว หรือภาชนะบรรจุน้ำ และของเหลว เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าลัดวงจร
- ห้ามมองไปที่แสงไฟที่ปล่อยออกมาโดยตรง
- ห้ามใส่วัสดุใด ๆ ลงในอุปกรณ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดปิด หรือขวางช่องระบายอากาศของอุปกรณ์
- เพื่อป้องกันการถูกไฟฟ้าดูด โปรดอย่าสัมผัสส่วนประกอบภายในของอุปกรณ์ ที่ได้รับความเสียหาย
- หากสายไฟของอุปกรณ์เกิดความเสียหาย และจะต้องกำจัดทิ้งหากไม่สามารถถอดออกได้ จะต้องทิ้งอุปกรณ์
- ห้ามใช้ที่บริเวณเท้า เด็กควรได้รับการดูแลในการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้อุปกรณ์นี้เป็นของเล่น
- ไม่ควรเปิดหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตัวเองไม่ว่าในกรณีใด ๆ เนื่องจากไม่สามารถรับประกันการทำงานที่ผิดพลาดหลังจากนั้นได้อีกต่อไป การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

1. อุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องจัดส่ง

ตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์ไม่ได้ถูกดัดแปลง และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคู่มือการใช้งานทั้งหมดอยู่ ก่อนใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายที่มองเห็นได้ต่ออุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมและหลังนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกแล้ว หากคุณมีข้อสงสัย อย่าใช้อุปกรณ์และติดต่อผู้ค้าปลีกของคุณหรือที่อยู่ฝ่ายบริการลูกค้าที่ระบุ

- 1 x ผลิตภัณฑ์กำจัดขน Pure Skin Pro
- 1 x ชุดคำแนะนำการใช้งาน
- 1 x อะแดปเตอร์หลัก

2. ป้ายและสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ในคำแนะนำการใช้งาน บนบรรจุภัณฑ์และบนป้ายบอกประเภทของอุปกรณ์:

	คำเตือน แสดงให้เห็นความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บ
	บันทึกความปลอดภัย ระบุความเป็นไปได้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
	บันทึก ข้อมูลที่มีความสำคัญ
	เพื่อป้องกันไฟดูด ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับน้ำ เช่น ในห้องน้ำ อ่างล้างหน้า ฯลฯ
	ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งาน
	ตัวเครื่องมีการป้องกันสองชั้นและสอดคล้องกับระดับการป้องกัน 2
	ใช้เฉพาะในร่มเท่านั้น
	ป้องกันจากความชื้น
	ข้อควรระวัง: ระวังสื่อบดคอล
	หลีกเลี่ยงการใช้งานใกล้ดวงตา
	ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้กับผิวสีแทน หรือหลังการอาบแดด
	การกำจัดอุปกรณ์ควรเป็นไปตามข้อกำหนดของ WEEE
	ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป
	ผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิคของ EAEU
	การจัดการบรรจุภัณฑ์ในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	อุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บและขนส่งที่อนุญาต
	ขั้วไฟฟ้ากระแสตรง
	ประสิทธิภาพพลังงานระดับ 6
	กระแสตรง อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับใช้กับกระแสตรงเท่านั้น
	ผู้ผลิต

3. วัตถุประสงค์การใช้งาน

อุปกรณ์เครื่องกำจัดขน IPL Pure Skin Pro มิได้สำหรับกำจัดขนตามร่างกายที่ไม่ต้องการทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย อุปกรณ์ต้องใช้เฉพาะบริเวณขา รักแร้ ขอบ bikini หน้าอก ท้อง หลัง และใบหน้า ได้เอนกแก้ม (ผู้หญิงเหมาะสำหรับการใช้บนใบหน้าเท่านั้น) อุปกรณ์ที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกแบบและวิธีการใช้ระบุไว้ในรายละเอียดการใช้งาน การใช้ที่ไม่เหมาะสมใด ๆ สามารถเป็นอันตรายได้ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ที่ไม่เหมาะสมหรือประมาท


เทคโนโลยี IPL – วิธีการทำงาน

IPL Pure Skin Pro เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสงกำจัดขนถาวร ใช้สำหรับการใช้งานส่วนตัว กระบวนการกำจัดขนด้วยแสงเป็นวิธีที่เป็นที่รู้จักและได้รับการพิสูจน์แล้ว กว่า 15 ปีของการใช้งานทางคลินิกทั่วโลก วิธีนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยและลดการเจริญเติบโตของเส้นขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสงกำจัดขนได้อย่างไร?

การกำจัดขนแบบใช้แสงเกิดขึ้นบนหลักการความร้อนจากลำแสง แบบคัดเลือก ซึ่งใช้พลังงานออปติคัลเพื่อปิดการงอกของเส้นผม เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ความร้อน รากผมจะเลือกดูดซับพลังงานแสงและเปลี่ยนเป็นความร้อน การคัดเลือกนี้เกิดขึ้นได้เมื่อพลังงานแสงที่ปล่อยออกมาในเนื้อเยื่อส่วนใหญ่ถูกดูดซับโดยเม็ดสีเมลานินในเส้นผม แสงพลังงานสูงจะถูกแปลงเป็นพลังงานความร้อน ซึ่งในที่สุดจะหยุดการเจริญเติบโตของเส้นผม

วัฏจักรการเจริญเติบโตของเส้นผมมีผลต่อการกำจัดขนด้วยแสงอย่างไร?

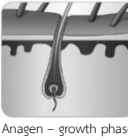


Anagen – growth phase

เส้นผมทุกเส้นในร่างกายของเราจะต้องผ่านสามขั้นตอนของวงจรการเจริญเติบโตของเส้นผม ได้แก่ แอนาเจน คาทาเจน และเทโลเจน เฉพาะเส้นขนที่อยู่ในระยะแอนาเจนหรือระยะการเจริญเติบโตเท่านั้นที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย IPL



Catagen – transitional phase

แม้ว่าระยะเวลาของวงจรการเจริญเติบโตของเส้นผมที่สมบูรณ์จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และขึ้นอยู่กับพื้นที่ของร่างกายที่เส้นผมมีการเจริญเติบโต โดยทั่วไปแล้ววงจรจะใช้เวลา 18 ถึง 24 เดือน

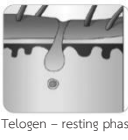

Telogen – resting phase

โปรดทราบว่าจำเป็นต้องมีวงจรการเจริญเติบโตของเส้นขนที่สมบูรณ์อย่างน้อยหนึ่งรอบ เพื่อให้สามารถกำจัดขนถาวรได้ โดยใช้ IPL Pure Skin Pro



4. คำเตือนและข้อควรระวัง

คำเตือน

ก่อนจะเริ่มใช้อุปกรณ์ ควรศึกษาคู่มือเพื่อความปลอดภัยอย่างละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้ โปรดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในที่ปลอดภัย และหยิบใช้ได้สะดวกเพื่อเป็นข้อมูลให้บุคคลอื่น ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์นี้ร่วมกัน

- อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกายและจิตใจ และได้รับการดูแลโดยผู้รับผิดชอบหรือได้รับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้
- ห้ามใช้อุปกรณ์ในผู้ที่ตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร
- ห้ามเด็กเล่นอุปกรณ์
- หากเกิดอาการบวมแดง โคม่า หรือพุพอง ให้หยุดใช้ตัวอุปกรณ์โดยทันที
- ห้ามมองแสง IPL ที่ถูกปล่อยเข้าไปในตลับไพลโดยตรง
- ห้ามปล่อยแสง IPL ออกไปในอากาศโล่ง!

- ศึกษาการเลือกระดับความเข้มของแสงได้จาก “ตารางเลือกระดับความเข้มของแสงที่มีต่อสีและขน” ที่ข้างกล่อง และทำการเลือกระดับความเข้มของแสงที่เหมาะสมกับผิวและเส้นขนของคุณ
- ไม่ควรใช้ IPL Pure skin Pro กับผู้ที่มีผิวคล้ำโดยธรรมชาติ
- อย่าพยายามแกะหรือเปิดตัวอุปกรณ์ หากสัมผัสกับอุปกรณ์อาจได้รับอันตรายจากไฟดูด หรือแสงจากอุปกรณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่อดวงตาได้
- ห้ามใช้อุปกรณ์ที่มีเจลสัมผัส เพราะอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

บันทึก, ข้อมูลที่มีความสำคัญ

IPL Pure skin Pro ใช้ได้ผลดีมากกับเส้นขนสีดำ หรือเส้นขนที่มีเม็ดสีสูง (High Melanin) เช่น ขนสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม จะได้ผลการใช้ที่ดีมาก ส่วนขนสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอ่อนก็สามารถใช้ได้ผลดี แต่ต้องอาศัยการกำจัดขนหลายรอบ เส้นขนสีแดงก็สามารถใช้ได้ผล แต่เส้นขนสีขาว สีเทา และสีบลอนด์ ใช้ไม่ค่อยได้ผลกับเครื่องกำจัดขนนี้ ซึ่งข้อมูล ที่ได้นี้เกิดจากการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้หลายคน

อันตราย

เก็บตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ห่างจากน้ำ ห้ามวางบนที่เปียกชื้น หรือบนผิวหนัง หรือของเหลวทุกชนิด

การกระทำต่อไปนี้อาจทำให้ได้รับอันตรายจากวงจรไฟฟ้า

- ห้ามใช้อุปกรณ์ ขณะอาบน้ำ
- ห้ามใช้อุปกรณ์ ขณะอยู่ในที่ชื้น หรือเปียก
- ห้ามใช้อุปกรณ์ เมื่อหล่นน้ำ

- หากอุปกรณ์ หล่นน้ำ ให้ถอดปลั๊กไฟโดยทันที
- ห้ามแตะอุปกรณ์ หรือปลั๊กไฟในขณะที่เปียก

คำเตือน


ห้ามใช้งานเครื่องกำจัดขน IPL Pure skin Pro หากคุณมีอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้

- หากคุณเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเคยมีประวัติว่าเป็นมะเร็งผิวหนังมาก่อน
- หากคุณเป็นโรคลมชักหรือลมบ้าหมู (Epilepsy)
- หากคุณมีแผลเป็นแบบคีลอยด์
- หากคุณเป็นเริม (Herpes) หรือโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)
- หากคุณมีโรคที่เกี่ยวข้องกับแสง เช่น พอร์ไฟเรีย โรคผิวหนัง แพ้แสงแดด ลมพิษ แสงอาทิตย์ (Solar Clotting Disorder) ภูมิแพ้ตัวเอง ฯลฯ

- หากคุณมีสภาพผิวที่ผิดปกติ ซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานหรือโรคระบบเผาผลาญอื่น ๆ
- หากคุณมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (Blood Clotting Disorder) ห้ามใช้งานเครื่องกำจัดขน IPL Pure skin Pro หากคุณได้รับยาและการรักษาดังต่อไปนี้
- หากคุณได้รับคำสั่งยาที่ทำให้ผิวหนังไวต่อแสงมากขึ้น (เช่น aspirin, ibuprofen, paracetamol), tetracyclines, phenothiazines, thiazide diuretics, sulphonyl urea, sulfonamide, DIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, alpha hydroxy acids (AHAs), beta hydroxy acids (BHAs), Retin-A, Accutane, tropical retinoids
- หากคุณกำลังเข้ารับการรักษาด้วยกรด azelaic
- หากคุณอยู่ระหว่างการทำสเต็มเซลล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
- หากคุณมีการรักษาขัดผิวหรือขั้นตอนการปรับผิวอื่น ๆ ในช่วงที่ผ่านมา 6-8 สัปดาห์

- หากคุณได้รับรังสีหรือเคมีบำบัดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ห้ามใช้อุปกรณ์ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ต่อไปนี้:

- บนเยื่อเมือกในบริเวณจมูกหรือลำคอ
- บนหรือข้างรากฟันเทียมที่ใช้งานอยู่ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์สำหรับภาวะกล้ามเนื้อสภาวะไม่อยู่ ปัมอินซูลิน เป็นต้น
- บนใบหน้าเหนือโหนกแก้มรอบดวงตาคิ้วหรือขนตา เนื่องจากอาจทำให้เกิดดวงตาเสียหายอย่างรุนแรง 
- บนหัวนม, วงปานหัวนม, ริมฝีปากด้านใน, ช่องคลอด, ทวารหนัก, จมูกและหู
- ผู้ชายห้ามใช้อุปกรณ์บริเวณองคธะหรือโขน้า
- การเจาะหรือสวมใส่วัตถุที่เป็นโลหะต่างๆ เช่น ต่างหูหรือ เครื่องประดับ
- บริเวณรอยสักหรือการแต่งหน้าถาวรในพื้นที่ ที่ต้องการทำการรักษา
- บนรอยที่มีสีน้ำตาลเข้มหรือ สีดำเช่น กระขนาดใหญ่, ปาน, ฝ้า, ตุ่ม หรือหูด
- บริเวณกลาก, โรคสะเก็ดเงิน, แผล, แผลเปิดหรือ การติดเชื้อเฉียบพลัน รอยงูบริเวณนั้นที่ได้รับการเยียวยารักษาจนเป็นปกติก่อนที่จะใช้อุปกรณ์
- บนผิวหนังที่เสียหาย หรือแตก หรือในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
- ในส่วนของร่างกายที่คุณอาจต้องการมีขนในอนาคต

รายการนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

หากคุณใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ควรได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเนื่องจาก การเจ็บป่วยและ/หรือ ไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นี้ปลอดภัยสำหรับคุณหรือไม่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือแพทย์ผิวหนังก่อนที่จะใช้อุปกรณ์

ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้

หากใช้งานอุปกรณ์ตามคำแนะนำเหล่านี้อาจเกิดผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อน ซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นกับการใช้งานอุปกรณ์


- หลังการรักษา อาจเป็นไปได้ว่าผิวจะแดงเล็กน้อยหรือคันอาการเหล่านี้ไม่เป็นอันตราย และจะหายเป็นปกติอย่างรวดเร็ว
- ในช่วงเวลาสั้น ๆ คุณอาจพบอาการทางผิวหนังคล้ายกับการถูกแดดเผาในบริเวณที่ทำการรักษา หากอาการนี้ไม่หายเป็นปกติภายในสามวัน ให้ปรึกษาแพทย์
- ผิวแห้งหรือระคายเคืองอาจเกิดจากการโกน หรือการโกนและแสง การรักษา ด้วยอาการนี้ไม่เป็นอันตรายและจะหายเป็นปกติในไม่กี่วัน หากคุณต้องการ คุณสามารถทำให้จุดที่รักษาเย็นลงด้วยน้ำแข็งหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆ
- หากผิวยังแห้งเกินไปคุณสามารถทาครีมเพิ่มความชุ่มชื้น 24 ชั่วโมงหลังการรักษา
- ในบางกรณีผิวที่ได้รับการรักษาผิวอาจมีสีแดงและบวมมาก ซึ่งมักเป็นเพราะระดับความเข้มที่คุณเลือกสูงเกินไปและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในส่วนที่ขอบบางของร่างกาย อาการแดงและบวมควรยุบภายใน 2-7 วันและการใช้น้ำแข็งประคบบ่อย ๆ ให้ความสะดวกอย่างอ่อนโยน แต่คุณควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดด
- การเปลี่ยนสีของผิวหนังพบได้ยากมากและอาจปรากฏเป็นรอยคล้ำหรือจางลงบนบริเวณผิวที่ได้รับการกระทบซึ่งอาจเกิดจากการใช้ระดับความเข้มที่สูงเกินไปสำหรับโทนผิวของคุณ หากการเปลี่ยนสีไม่ลดลงภายใน 2 สัปดาห์ ให้ปรึกษาแพทย์ ห้ามรักษาพื้นที่ที่เปลี่ยนสีอีกครั้งจนกว่าการเปลี่ยนสีจะหายเป็นปกติ
- ในกรณีที่พบได้ยาก ผลไหม้หรือแผลที่ผิวหนังสามารถเกิดขึ้นได้หลังการรักษา การไหม้หรือแผลอาจใช้เวลาสักพักในการรักษา และในบางกรณีที่มีอาการมาก อาจทิ้งรอยแผลเป็นไว้
- ในกรณีที่พบได้ยาก การติดเชื้อที่ผิวหนังและ การอักเสบอาจเกิดขึ้นได้ สิ่งเหล่านี้อาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์กับบาดแผล หรือบาดแผลที่เกิดจากการโกนหนวด หรือบาดแผลที่มีอยู่แล้วหรือขนคุด

- อาการปวดรุนแรงอาจเกิดขึ้นระหว่างหรือหลังการรักษาในกรณีต่อไปนี้:

- หากคุณใช้อุปกรณ์บนผิวที่ไม่โกนขน หากคุณเลือกระดับความเข้มที่สูงเกินไปสำหรับโทนสีผิวของคุณ ถ้าคุณรักษาพื้นที่ผิวเดียวกันหลายครั้งด้วยพัลส์แสง หากคุณใช้อุปกรณ์ในบาดแผลเปิด ไวไฟ รอยสัก แผลไฟไหม้ ฯลฯ
- กรณีที่พบได้ยากอาจเกิดแผลเป็นถาวร มักจะเกิดแผลเป็นในรูปแบบของแผลบนสีขาบนผิวหนัง อาจต้องรักษาด้วยการศัลยกรรมตามลักษณะของแผลเป็น
- กรณีที่พบได้ยาก อาจทำให้เกิดเลือดสีน้ำตาลเงินซ้ำ/สีม่วง ซึ่งอาจอยู่ยาวนาน 5-10 วัน เมื่อเลือดจางลงการเปลี่ยนสีผิวเป็นสีน้ำตาลสนิม (รอยดำ) ซึ่งอาจสามารถเกิดเป็นรอยถาวรได้

คำเตือนสำหรับคนที่อาบแดดก่อนและหลังการรักษา!

อาบแดดก่อนเข้ารับการรักษา

1. หลังจากอาบแดดให้รอนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนใช้อุปกรณ์ 
2. ก่อนการรักษาควรตรวจสอบผิวเพื่อหาสัญญาณของการถูกแดดเผา หากคุณมีผิวไหม้ที่ยังไม่หายดีให้รอนจนกว่าจะหายสนิทเพื่อใช้อุปกรณ์
3. ดำเนินการทดสอบความไวของผิวหนังบนผิวหนังที่เป็นสีแทน (ดูหัวข้อ 5.1) เพื่อกำหนดว่าความเข้มพลังงานเหมาะสมสำหรับคุณ

อาบแดดหลังการรักษา

1. หลังการรักษาให้รอนอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนอาบแดด ผิวที่แดงต้องหายสนิทก่อนการอาบแดด
2. สำหรับ 2 สัปดาห์แรกหลังการรักษา ผิวที่ได้รับการรักษาจะต้องคลุมด้วยเสื้อผ้าหรือกันแดด (อย่างน้อย SPF 30) เมื่อคุณอยู่กลางแจ้ง

พอกผิวด้วยแสงประดิษฐ์

คำแนะนำสำหรับ "การอาบแดดก่อนการรักษา" และ "การอาบแดดหลังจากการรักษา" ยังใช้กับการพอกหนังโดยใช้แสงประดิษฐ์และโลชั่นพอกผิว

อย่าใช้อุปกรณ์ 24 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังการใช้สรวายน้ำ/ขาวนาคลอรีนอาจนำไปสู่การระคายเคืองผิวหนัง

สำคัญ

เพื่อป้องกันความเสียหาย

- อย่าพยายามเปิดหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ อาจทำให้เกิดความเสียหายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ
- ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้หากไม่ได้ใช้งาน
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์หากอุปกรณ์, สายเคเบิลหรือปลั๊กเสียหาย และเก็บสายไฟหลักอยู่ห่างจากพื้นผิวที่ร้อน
- ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟทันทีหลังเลิกใช้งาน
- อย่าใช้อุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก beurer GmbH
- อย่าใช้งานอุปกรณ์ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10°C หรือสูงกว่า 35°C
- ห้ามใช้อุปกรณ์หากคุณเห็นควันหรือมีกลิ่นไหม้ระหว่างใช้งาน
- ห้ามใช้อุปกรณ์หากพัดลมที่เปิดในอุปกรณ์รั่วหรือหายไป
- อย่าใช้อุปกรณ์หากเซ็นเซอร์สีผิวของอุปกรณ์หรือหน้าสัมผัสแตก

⚠อย่ายิงแสงที่พื้นผิวอื่นใด นอกจากผิว มิฉะนั้นสิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อหน้าต่างการปล่อยแสงหรือเซ็นเซอร์สีผิว ความเสียหายอาจเกิดจากพื้นผิวที่มีประกาย เปิดใช้งานฟิล์มแสงเพียงครั้งเดียวเท่านั้นสัมผัสกับผิวหนัง

- หลังการใช้งานให้เก็บอุปกรณ์ไว้ในกล่องเดิม
- อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสถูกแสงแดดโดยตรงหรือแสง UV เป็นเวลาหลายชั่วโมง เพื่อป้องกันความเสียหาย

5. รายละเอียดอุปกรณ์



1. หน้าสัมผัส
2. เซ็นเซอร์สีผิว / เซ็นเซอร์สัมผัสผิวหนัง
3. จอแสดงความเข้มแสง (3 ระดับ)
4. ปุ่มเปิด / ปิด
5. ไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งาน
6. ปุ่มปล่อยแสง
7. ช่องสำหรับเสียบชาร์จอะแดปเตอร์

คุณลักษณะด้านความปลอดภัย

อุปกรณ์มีเซ็นเซอร์สีผิว เซ็นเซอร์สีผิวนี้ป้องกันคุณจากการรักษาผิว ถ้ามีผิวดำล้าเกินไป อุปกรณ์ยังมีตัวกรองรังสี UV ในตัวเพื่อป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตราย อุปกรณ์มีเซ็นเซอร์สัมผัสผิวหนัง ในตัวเพื่อปกป้องดวงตา เซ็นเซอร์ได้รับการพัฒนา เพื่อไม่ให้แสงกระทบเมื่อปล่อยอุปกรณ์นี้ไว้ในอากาศ แสงจะปล่อยออกมาที่ต่อเมื่อเซ็นเซอร์สัมผัสผิวหนังสัมผัสกับผิวหนังอย่างเต็มที่

6. การใช้งานครั้งแรก

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณควรทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. การใช้แผนภูมิสีขนและผิว (ด้านหลังของคำแนะนำในการใช้งาน) ตรวจสอบระดับความเข้มที่เหมาะสมกับคุณ เครื่องหมาย “x” ในตารางระบุว่าอุปกรณ์ไม่เหมาะสำหรับสีผิวของคุณ



2. ทุกครั้งก่อนใช้ IPL Pure Skin Pro โปรดโกนขนในจุดที่ต้องการรักษาโดยใช้มีดโกน และห้ามใช้ครีมกำจัดขน

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณผิวหนังที่ได้รับการโกนแห้งและสะอาด (ปราศจากสิ่งตกค้างใดๆ เช่น แป้ง, ครีม, เครื่องสำอาง, หรือ ยาดับกลิ่น)



คำเตือน

ห้ามทำความสะอาดบริเวณผิว ด้วยของเหลวที่ไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ หรือ Acetone ก่อนการใช้งาน



4. ทำความสะอาดบริเวณเซ็นเซอร์ผิวของตัวเครื่องด้วยผ้าสำลีแห้ง
5. ทดสอบความอ่อนไหวของผิวในจุดที่ต้องการจะรักษา 48 ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มทำการรักษาอย่างสมบูรณ์แบบ

ทดสอบความไวต่อแสงของผิว (Skin Sensitivity Test)

1. เสียบปลั๊กที่เชื่อมกับอุปกรณ์กับอุปกรณ์และเสียบปลั๊กหลักลงรูปปลั๊กไฟไปงบอกสถานะจะฉายขึ้นมาซึ่งสีเขียวเป็นการบ่งบอกว่าพร้อมใช้
2. เมื่อกดปุ่ม เปิด / ปิด จอแสดงระดับพลังงานจะเริ่มฉายแสงสีเขียวขนาดเล็กเป็นการเริ่มต้นที่ระดับ 1

i หมายเหตุ

เพิ่มระดับความแรงของแสงในกรณีทีระดับก่อนหน้าไม่ได้ทำให้เกิดอาการระคายเคืองเท่านั้น ถ้าความแรงแสงระดับที่ 1 ทำให้เกิดอาการระคายเคืองมากเกินไปจงอย่าเพิ่มระดับความแรงแสง

3. จัดส่วนที่ไฟกระทบไว้บนผิวหนังและกดปุ่มปล่อยแสง เพื่อปล่อยแสงระดับ 1 ออกมา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณจุดที่ไฟกระทบและเซ็นเซอร์ตรวจจับผิวหนังสัมผัส กับผิวหนังโดยตรง เนื่องจากไฟกระทบจะถูกปล่อยออกมาเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับผิวถูกสัมผัสโดยตรงต่อผิวเท่านั้น ท่านจะสามารถเห็นแสงไฟที่ถูกปล่อยออกมาและได้ยินเสียงของการปล่อยแสงรวมถึงการรู้สึกแสบร้อนและหลังจากการปล่อยแสงครั้งแรกพัฒนาภายในอุปกรณ์จะเริ่มทำงานภายใน 1-3 วินาที (ขึ้นอยู่กับความแรงของระดับ) อุปกรณ์พร้อมที่จะปล่อยแสงครั้งถัดไปและจอบ่งบอกสถานะจะแสดงไฟสีเขียว

4. วางส่วนที่ไฟกระทบไว้ตรงจุดถัดไปที่ต้องการจะรักษา การกดปุ่มเปิด / ปิดอีกครั้งจะเพิ่มระดับของแสงและกดปุ่มปล่อยแสงจนจุดที่ต้องการจะรักษา ห้ามเพิ่มระดับความแรงของไฟกระทบเกินกว่าที่สีผิวของคุณจะรับไหว (สามารถตรวจสอบตารางสีผิว / สีขนและระดับความแรงแสง ที่ปลอดภัยได้ที่กล่องสินค้า)

i หมายเหตุ

เพิ่มระดับความแรงของแสงในกรณีทีระดับก่อนหน้าไม่ได้ทำให้เกิดอาการระคายเคืองเท่านั้น ถ้าความแรงแสงระดับที่ 1 ทำให้เกิดอาการระคายเคืองมากเกินไปจงอย่าเพิ่มระดับความแรงแสง


5. ถ้าคุณรู้สึกระคายเคืองผิวหนังหลังจากการปล่อยแสงโปรดลดระดับความแรงแสงลง
6. หลังจากการตรวจสอบความไวต่อแสงของผิวควรรอ 48 ชั่วโมง และสังเกตบริเวณจุดที่ได้ทำการรักษาหากผิวหนังบริเวณนั้นไม่มีอาการที่ผิดปกติ (ไม่มีอาการหรือมีรอยแดงเล็กน้อย) คุณสามารถเริ่มต้นการรักษาได้ด้วยระดับความแรงแสงเดียวกับที่ทดสอบได้

i หมายเหตุ

หากผิวหนังบริเวณที่ได้รับการทดลองมีปฏิกิริยาตอบสนอง(ผิวด่างหรือผิวงอม) ให้รอนจนกว่าผิวหนังบริเวณนั้นจะหายและทดสอบความไวต่อแสงของผิวใหม่ในระดับความแรงแสงที่อ่อนลง ถ้าหากเกิดอาการตอบสนองอันไม่พึงประสงค์อีกควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ

7. การใช้งาน

1. เสียบปลั๊กอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ ไฟแสดงสถานะ เริ่มกะพริบเป็นสีเขียว (พร้อมใช้งาน)

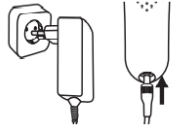

2. เมื่อกดปุ่ม เปิด/ปิด จอแสดงระดับพลังงานจะเริ่มฉายแสงสีเขียวขนาดเล็กเป็นการเริ่มต้นที่ระดับ 1



3. หากต้องการที่จะเพิ่มความแรงของแสง จงกดปุ่มเปิด/ปิดไปเรื่อยๆ จนกว่าท่านจะได้รับความแรงที่สมใจ

4. วางส่วนที่ไฟกระทบไว้บนผิวหนังและกดปุ่มปล่อยแสงเพื่อปล่อยแสงระดับ 1 ออกมา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณจุดที่ไฟกระทบและเซ็นเซอร์ตรวจจับผิวหนังสัมผัส กับผิวหนังโดยตรง เนื่องจากไฟกระทบจะถูกปล่อยออกมาเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับผิวถูกสัมผัสโดยตรงต่อผิวเท่านั้น ท่านจะสามารถเห็นแสงไฟที่ถูกปล่อยออกมาและได้ยินเสียงของการปล่อยแสงรวมถึงการรู้สึก แสบร้อน และหลังจากการปล่อยแสงครั้งแรกพัฒนาภายในอุปกรณ์จะเริ่มทำงานภายใน 1-3 วินาที (ขึ้นอยู่กับความแรงของระดับ) อุปกรณ์พร้อมที่จะปล่อยแสงครั้งถัดไป และจอบ่งบอกสถานะจะแสดงสีเขียว



7.1 วิธีการใช้งาน

⚠ คำเตือน

ห้ามยิงแสงตรงจุดเดิม 2 ครั้ง ภายในหนึ่งการรักษา เนื่องจากจะเพิ่มโอกาสที่ผลข้างเคียงจะเกิดขึ้น

i หมายเหตุ

การยิงแสงของอุปกรณ์ควรจะเป็นลำดับเริ่มจากจุดแรกไปยังจุดสุดท้าย ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้จำได้ว่าจุดไหนถูกรับการยิงไปแล้วและยังช่วยป้องกันการยิงทับกัน ตรงบริเวณจุดปล่อยแสงของอุปกรณ์ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทิ้งรอยเอาไว้บนจุดที่ถูกรักษาชั่วคราว เพื่อเป็นการเล็งจุดใหม่ได้อย่างแม่นยำ

การเริ่มต้นใช้วิธีที่ 1 : โหมดแฟลชอัตโนมัติ

กดปุ่มปล่อยแสงค้างเอาไว้ จะทำให้อุปกรณ์ปล่อยแสงกระทบออกมาแบบติดต่อกัน เป็นระยะเวลาหนึ่ง トラバド ที่เซ็นเซอร์ตรวจจับผิวยังสัมผัสกับผิวโดยตรง หลังจากไฟกระทบรอบ 3 ที่เกิดจากการกดปุ่มปล่อยแสงค้าง อุปกรณ์จะเปลี่ยนเป็นโหมดแฟลชอัตโนมัติ ซึ่งอุปกรณ์จะปล่อยแสงในระยห่างตามปกติ การใช้โหมดนี้จะไม่จำเป็นต้อง กดปุ่มด้วยตนเอง โหมดแฟลชอัตโนมัตินี้เหมาะสำหรับการรักษาพื้นที่ใหญ่ อย่างเช่น ขา

การเริ่มต้นใช้วิธีที่ 2 : ปล่อยแสงกระทบทีละครั้ง

กดและปล่อยปุ่มปล่อยแสงทันทีที่ไฟกระทบออกมา สำหรับการปล่อยแสงครั้งต่อไป วางอุปกรณ์ไว้ตรงจุดถัดไปข้างๆ จุดที่ทิ้งโดนรักษา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณจุดที่ไฟกระทบและเซ็นเซอร์ตรวจจับผิวหนังสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง เนื่องจากไฟกระทบจะถูกปล่อยออกมา เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับผิวถูกสัมผัสโดยตรงต่อผิวเท่านั้น ซึ่งโหมดนี้สามารถที่จะการันตีความแม่นยำในการรักษาเฉพาะจุด เช่น เข่า หรือข้อเท้า

i หมายเหตุ

หากอุปกรณ์ไม่ปล่อยแสงและจอบ่งบอกสถานะเป็นสีส้ม จะเป็นการบ่งบอกว่าเซ็นเซอร์จับผิวไม่ได้ถูกสัมผัสกับผิวหนังมากพอ

หากอุปกรณ์ไม่ปล่อยแสงและจอบงกสถานะเป็นสีแดง จะเป็นการบ่งบอกว่าจุดที่ต้องการจะรักษานั้นมีสีที่เข้มเกิน

❗ หมายเหตุ

หากอุปกรณ์ร้อนเกินไปสำหรับผิวหนังของคุณ โปรดรอสักพักเพื่อที่จะให้อุปกรณ์เย็นลง และหลังจากนั้นคุณสามารถดำเนินการรักษาต่อไปตามปกติ

7.2 การใช้งานบริเวณใบหน้า

⚠️ คำเตือน

- ห้ามผู้ชายใช้อุปกรณ์นี้บนใบหน้า
- ห้ามใช้อุปกรณ์บนบริเวณใบหน้า ระดับพลังงานมากกว่าระดับที่ 2 ห้ามใช้อุปกรณ์ ในบริเวณใบหน้าเหนือกว่า โหนกแก้ม หรือใกล้ดวงตา คิ้ว หรือขนตา ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ อย่าใช้เครื่องกำจัดขนในบริเวณขน ในโพรงจมูก และบริเวณลำคอ

• สภาพผิวบริเวณใบหน้ามีความบอบบาง และต้องการการดูแลรักษาอย่างพิเศษ โปรดศึกษาคำเตือนเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ จึงขอแนะนำให้คุณเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องกำจัดขนบริเวณร่างกายก่อนการใช้งานในบริเวณใบหน้าและบริเวณอื่น ๆ เช่น ลำคอ กราม ฯลฯ

1. ควรที่จะทำการทดสอบความไวต่อแสงของผิว ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนการทำการกำจัดขนการทดสอบความไวต่อแสง ควรกระทำในบริเวณหน้า ที่ไม่มีขน เช่น ใต้ใบหู หรือ บริเวณข้างลำคอ เพื่อค้นหาระดับพลังงานที่เหมาะสม

⚠️ คำเตือน

อย่าทำการทดสอบในบริเวณที่ทำการทดสอบซ้ำ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ หลังการดำเนินการทดสอบ

2. มาร์คตำแหน่งที่ต้องการกำจัดขนด้วยอายุไลน์หรือสีขา เพื่อป้องกัน การปล่อยแสง IPL ช้อนทับตำแหน่งพื้นที่เดิม ที่ได้รับการกำจัดเส้นขนไปแล้ว

3. ใช้กระจกช่วย จะทำให้วางตำแหน่งกำจัดขนในบริเวณใบหน้าได้อย่างถูกต้อง

4. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด การรักษาบริเวณริมฝีปากบน วางจุดปล่อยแสงบนบริเวณ ที่กำหนดไว้ตาม

❗ หมายเหตุ

คุณสามารถเน้นริมฝีปากของคุณลง เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการรักษาอย่างปลอดภัย หรือทาอายไลน์เนอร์สีขากลงไปบนริมฝีปาก เนื่องจากเส้นสีขาจะช่วยสะท้อนแสงและพลังงานแสง ฉะนั้นจะช่วยไม่ให้แสงโดนริมฝีปากอย่างไม่พึงประสงค์

การรักษาแก้มและกราม

วางจุดปล่อยแสงลงตรงตำแหน่งที่กำหนดไว้บนรูป กดปุ่ม ยิงไฟ

กระพริบและไล่ยิงไปเรื่อยๆ จากแก้มไปถึงกรามของทั้งสองข้างบน

ใบหน้าวางจุดปล่อยแสงลงตรงตำแหน่งที่กำหนดไว้บนรูป กดปุ่มยิงไฟ

กระพริบและไล่ยิงไปเรื่อยๆ จากลำคอดึงคางของทั้งสองข้างบนใบหน้า

การดูแลหลังการรักษารอบใบหน้า

- ทาโลชั่นที่สกัดจากธรรมชาติ เช่น โลชั่นว่านหางจระเข้
- ห้ามใช้สครับขัดผิว โลชั่นผิวขาว หรือ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังการกำจัดขน เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวได้
- อย่างน้อย 48 ชั่วโมง หลัง การกำจัดขน ให้หลีกเลี่ยง การถูกแสงแดดนานกว่า 15 นาที หากจำเป็นต้องออกแดด ต้องทาครีมกันแดดที่มี SPF 30 ขึ้นไป



• อย่าทำการกำจัดขน โดยการแว็กซ์ หรือใช้แหนบก่อนหลังจากกำจัดขนด้วยเครื่อง Beurer Velvet Skin Pro แล้ว

โปรดจำไว้ว่าจะต้องใช้เครื่องกำจัดขนให้สัมพันธ์กับวงจรการเจริญเติบโตของเส้นขน เพื่อให้ขนหลุดร่วงลงอย่างถาวร

7.3 วงจรการใช้งานของอุปกรณ์

สำหรับการรักษารอบร่างกาย

- 3-4 ครั้งแรกของการรักษาควรจะห่างกันประมาณ 2 อาทิตย์
 - สำหรับการใช้งานครั้งที่ 5-7 ควรจะห่างกันประมาณ 4 อาทิตย์ และหลังจากนั้น ท่านสามารถใช้งานตอนไหนก็ได้ตามจำเป็น จนกว่าผลลัพธ์จะออกอย่างเห็นได้ชัด
- สำหรับการรักษารอบใบหน้า**

- 6 ครั้งแรกของการใช้งานแต่ละครั้งบนใบหน้า ควรห่างกันประมาณ 2 อาทิตย์
- สำหรับการใช้งานครั้งที่ 7-12 ควรห่างกันประมาณ 4 อาทิตย์ และหลังจากนั้นท่านสามารถใช้งานตอนไหนก็ได้ตามจำเป็น จนกว่าผลลัพธ์จะออกอย่างเห็นได้ชัดนี้เป็นเพียงแผนการรักษาที่ถูกแนะนำและพิสูจน์แล้วว่าดีที่สุดใน ท่านสามารถสร้างแผนการรักษาด้วยตัวคุณเองเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ดังที่คาดหวังไว้

7.4 การดูแลอุปกรณ์หลังการใช้งาน

- หลังรักษาเสร็จทุกครั้งกดปุ่ม เปิด / ปิด ค้างเอาไว้ 3 วินาที อุปกรณ์จะอยู่ในโหมดรอใช้งาน เมื่อไฟแสดงสถานะสีเขียวกระพริบ
- ปลด / ถอด อะแดปเตอร์ออกจากตัวเครื่อง
- ควรทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานเสร็จทุกครั้ง โดยเฉพาะตรงจุดที่ไฟกระพริบ (ดูได้ที่การดูแลและบำรุงรักษา IPL Pure Skin Pro)
- หลังจากการทำความสะอาดอุปกรณ์ ควรจะเก็บอุปกรณ์เข้าในกล่องเดิม และห่างจากบริเวณที่มีความชื้น
- หลังการรักษาห้ามใช้ที่ดับกลิ่น / โรลออน ระวังกลิ่นหรือไอร่า ทั้งสิ้น เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้

8. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

หลังจากการใช้งานอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลายของส่วนใช้งานแบบมือจับ


เมื่อทำความสะอาดห้ามใช้ตัวทำละลายหรือการทำ

ความสะอาดที่รุนแรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อนตัวทำละลาย

เนื่องจากพื้นผิวอาจเสียหายได้ ห้ามจุ่มอุปกรณ์

หรือชิ้นส่วนใด ๆ ลงในน้ำ!

- ก่อนทำความสะอาดให้ถอดอะแดปเตอร์ของอุปกรณ์ออกจากเต้าเสียบ
- ทำความสะอาดตัวเครื่องของอุปกรณ์ด้วยผ้าแห้งและสะอาด
- ค่อยๆ ทำความสะอาดบริเวณหน้าสัมผัสผิวหน้า โดยใช้ผ้าที่ไม่ใช่ขุยชุบน้ำหมาด ๆ

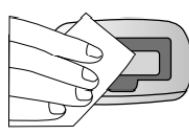

9. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

“อุปกรณ์ไม่ทำงาน”

• ตรวจสอบว่า อุปกรณ์มีการต่อสายไฟที่ตัวอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว

• ตรวจสอบว่า ต่อสายไฟเข้ากับปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้ว

“ไม่มีแสงออกมา เมื่อกดปุ่มปล่อยแสง”

• ต่อมั่นใจว่า ส่วนมือจับที่ปล่อยแสงแนบชิดกับผิวดีแล้ว เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเพราะอุปกรณ์จะฉายแสงเฉพาะกรณีที่คุณกดปุ่มบนผิวเท่านั้น

• หากไฟแสดงสถานะบนอุปกรณ์เป็นสีแดงสว่าง แสดงว่าสีผิวของคุณซึ่งวัดโดยเซ็นเซอร์สีผิวเข้มเกินไปสำหรับการใช้งานที่ปลอดภัย ทดสอบอุปกรณ์ในส่วนอื่นของร่างกาย ของคุณหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

• หากไฟแสดงสถานะบนอุปกรณ์เป็นสีส้มสว่างขึ้น แสดงว่าการสัมผัสกับผิวหนังกึ่งตัว โดยเซ็นเซอร์สัมผัสสีผิวหนังกั้น ไม่เพียงพอ เพิ่มระดับการสัมผัสกับผิวหน้าหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

• หากไฟแสดงสถานะติดสว่างเป็นสีแดงอย่างถาวร แสดงว่าถึงจำนวนสูงสุดของการยิงแสงแล้ว

10. คำถามที่พบบ่อย

- อุปกรณ์นี้จะใช้งานได้อย่างไร?

ใช้ได้ผลจริง – ในการทดลองทางการแพทย์ อุปกรณ์นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเครื่องกำจัดขน Beurer Velvet Skin Pro มีความปลอดภัยในการกำจัดเส้นขนในระยะยาว

- อุปกรณ์นี้ใช้เวลาในการรักษานานแค่ไหน?

เวลาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่ของร่างกายที่กำลังรับการรักษา การรักษาทั่วร่างกาย (ขา แขน รักแร้ โขนบิกินี และใบหน้าใต้โหนกแก้ม) ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ที่ระดับความเข้มของแสงต่ำสุด เนื่องจากอุปกรณ์ทำงานโดยใช้ไฟฟ้า จึงสามารถใช้งานได้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อกำจัดขนอย่างเต็มรูปแบบตามต้องการพื้นที่ของร่างกาย

- การใช้งานอุปกรณ์นี้ ปลอดภัยหรือไม่?

อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบด้านความปลอดภัยในการใช้งานส่วนบุคคลและผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ทำให้อุปกรณ์นี้ได้มาตรฐาน เช่นเดียวกับอุปกรณ์ด้านผิวหนังหรืออุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ แต่การใช้งานต้องทำตาม ข้อปฏิบัติและทำตามคู่มือที่ได้กำหนดไว้

- อุปกรณ์นี้ทำให้เจ็บปวดได้หรือไม่?

เมื่อใช้อย่างถูกต้องผู้ใช้อุปกรณ์ส่วนใหญ่จะรู้สึกอุ่นเล็กน้อยในบริเวณที่ฉายแสง ผู้ใช้ที่มีผมหนาและดำอาจจะรู้สึกเจ็บบ้างบางครั้งก็ทำงาน แต่จะบรรเทาลงเมื่อการกำจัดขนเสร็จสิ้น อุปกรณ์มีการตั้งค่าพลังงาน 3 แบบซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกระดับการใช้งานให้เหมาะสมกับตนเองได้

การใช้งานควรใช้บ่อยแค่ไหน?

การกำจัดเส้นขนในแต่ละส่วน ควรทำทุกๆ 2 สัปดาห์แรก สำหรับครั้งแรก ครั้งที่สองครั้งที่สามถึงครั้งที่สี่ หลังจากนั้น การกำจัดเส้นขนจะทำเมื่อมีเส้นขนเกิดขึ้นมาใหม่ ทำจนกว่า จะได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ

- อุปกรณ์นี้ ใช้ได้ผลกับ เส้นขนที่มีสีขา สีเทา หรือสีบลอนด์หรือไม่?

อุปกรณ์นี้ใช้ได้ผลมากที่สุดกับเส้นขนสีเข้มๆ หรือเส้นขนที่มีองค์ประกอบ ของเม็ดสีเมลานินเป็นเม็ดสีที่ทำให้เกิดสีเส้นขนและสีผิว เมลา닌 จะดูดซับพลังงานของแสงสีที่ตอบสนองดีที่สุด คือ “สีดำ” และ “สีน้ำตาลเข้ม” แม้ว่า เส้นขนสีน้ำตาลและเส้นขนสีน้ำตาลอ่อน จะมีการตอบสนองต่อการทำงาน แต่ก็ต้องใช้เวลานานในการกำจัดเส้นขน

นานกว่าปกติ เส้นขน สีแดง อาจจะทำให้อุปกรณ์ทำงานได้บ้างเล็กน้อย ส่วนสีขา สีเทา หรือสีบลอนด์ จะไม่มีการตอบสนองต่ออุปกรณ์ ทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้

- ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์นี้ กับผิวสีน้ำตาล หรือผิวสีดำได้หรือไม่?

อย่าพยายาม ใช้อุปกรณ์นี้กับคนที่ผิวสีเข้มตามธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถทำงานได้ อุปกรณ์นี้ใช้หลักการของแสงในการทำงาน เพื่อกำจัดเส้นขนส่วนที่ไม่ต้องการออกไป โดยมีการวัดระดับสีเส้นขนกับสีผิวในการใช้งานกับผิวที่มีสีผิวเข้มจะทำให้เสี่ยงต่อการทำให้ผิวไหม้ พุพองและสีผิวเปลี่ยนได้เพราะตัวตรวจจับสีผิวที่อยู่ในอุปกรณ์จะทำการวัดเทียบระดับสีผิว ก่อนการเริ่มต้นทำงาน และมีการเทียบสี ในระหว่างการฉายแสง หากมีการใช้งานกับผู้ใช้ที่มีผิวสีเข้ม ตัวตรวจจับจะไม่สามารถเทียบสีผิวในระหว่างการฉายแสงได้

- จะเห็นผลสำเร็จของการกำจัดขนระยะยาวเมื่อใด?

เนื่องจากการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้แสงเป็นพื้นฐานหรืออุปกรณ์ที่ใช้ เลเซอร์จะไม่ แสดงผลในทันทีทันใด และในความเป็นจริงผู้ใช้ไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง การใช้งาน บางครั้งเส้นขนอาจจะเกิดขึ้นอีกหลังจากการใช้งานไปแล้ว 2 สัปดาห์เส้นขนนั้นก็จะหลุดร่วงไปเอง แต่เส้นขนก็อาจจะเกิดขึ้นอีกในช่วงเวลาถัดมา นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ต้องมีการกำจัดเส้นขนหลายรอบ เพื่อให้ประสิทธิผลสำเร็จอย่างที่ต้องการ

- ผู้ชายสามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้หรือไม่?

เนื่องจากอุปกรณ์ถูกออกแบบมาสำหรับผู้หญิง แต่ผู้ชายก็สามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตามเส้นขนของผู้ชายชนิดที่ขึ้นบนหน้าอกก็ควรใช้เวลาในการกำจัดขนหลายครั้งมากกว่าการกำจัดเส้นขนของผู้หญิง

- ทำไมเส้นขนยังขึ้นอีก เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์?

เป็นเรื่องปกติที่เส้นขนจะขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ ภายหลังจากที่ กำจัดเส้นขน กระบวนการเกิดนี้เรียกว่า “การขับออกมา (Ejection)” และจะเกิดขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ และจะเห็นเส้นขนร่วงออกมาเล็กน้อย เช่นเดียวกับการที่เส้นขนร่วงเองตามธรรมชาติ กรณีนี้เกิดขึ้นได้กับปริมาณ เส้นขนส่วนหนึ่งที่สูญเสียคุณสมบัติ หรือการเติบโตที่แตกต่างออกไป ซึ่งไม่ใช่ผลกระทบของการใช้งานอุปกรณ์เส้นขนเหล่านี้จะต้องถูกกำจัดอีกต่อไป และนี่เป็นเหตุที่ทำให้ต้องใช้อุปกรณ์ในการกำจัดขนหลายครั้งเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ

- ได้ยินมาว่า เส้นขนส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มี การกำจัดเส้นขนด้วยแสง IPL นั้นจะมีลักษณะบางและเล็ก?

ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ ซึ่งมีรายงานจำนวนหนึ่งของผู้เสริมความงามกับแพทย์ เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยปกติแล้ว เส้นขนเหล่านี้คือชิ้นส่วน เล็กๆของเส้นขนดั้งเดิมหากใช้การกำจัดเส้นขนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ได้ผลลัพธ์อย่างพอใจ

- ทำไมผิวสีแทนไม่สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้?

ห้ามใช้อุปกรณ์บนผิวสีแทน หรือหลังวันที่อาบแดด ผิวสีแทนและผิวที่ผ่านการอาบแดด จะมีปริมาณเม็ดสีเมลานินปริมาณมากด้วยคุณสมบัตินี้ ชนิดของสีผิวและลักษณะผิวเหล่านี้จะทำให้สีผิวเป็นสีแทนได้อย่างรวดเร็วจำนวนของเมลานิน ที่มากขึ้น ทำให้ผิวมีความเสี่ยงสูงจากผลกระทบในการใช้อุปกรณ์นั้นคือ อาการไหม้ อาการพุพอง และสีผิวมีการเปลี่ยนแปลง เช่น อ่อนลง หรือ เข้มขึ้น

- การใช้อุปกรณ์ในระยะยาว เป็นอันตรายต่อผิวของผู้ใช้หรือไม่?

การใช้งานแสงและพลังงานเลเซอร์ในการดูแลความงาม ได้รับการทำเป็นเอกสารวิจัยกว่า 15 ปี จากระดับมืออาชีพและเป็นวารสารที่เทียบเท่ากัน วารสารและสถาบันที่เคารพนับถือกันดี เช่น Mayo Clinic ซึ่งวารสารเหล่านี้ รวมถึงสถาบัน ไม่ได้รายงานผลข้างเคียงหรือความเสียหายใดๆจากการใช้งานในระยะยาวของแสง IPL และเลเซอร์เลย

- ต้องป้องกันตัวเองจากแสงแดดนานเท่าไร ก่อนใช้งานอุปกรณ์นี้?

ควรป้องกันตัวจากแสงแดด ประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์ อย่างไรก็ตามหากไม่มั่นใจเกี่ยวกับการป้องกันตนจากแสงแดดควรสอบถามแพทย์ หรือ ตัวแทนจำหน่ายฯ

- ควรทำสิ่งใดบ้าง ก่อนที่จะใช้งาน?

ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ใช้ครีมกันแดด ที่มีค่า SPF มากกว่า 30 จะช่วยป้องกันได้เช่นเดียวกับการใช้ผ้าปกคลุมผิวบริเวณที่ต้องการกำจัดเส้นขน ควรได้รับการทำความสะอาดด้วยสบู่อ่อนๆ และควรโกนขนออกให้เรียบร้อย

- ควรดูแลผิวที่ผ่านการกำจัดเส้นขนอย่างไร?

ผิวหนึ่งที่ผ่านการกำจัดเส้นขน สามารถทำความสะอาดและบำรุงรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบมาตรฐาน การดูแลเป็นพิเศษ คือ ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดด

หากไม่มีเครื่องป้องกันแดด การป้องกันทำได้โดยการใช้อุปกรณ์กันแดดที่มีค่า SPF มากกว่า 30 และ ปิดผ้าคลุมด้วยผ้าจะป้องกันตัวเองจากแสงแดดได้


11. การกำจัดอุปกรณ์

ด้านสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งอุปกรณ์ลงในถังขยะในครัวเรือน เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน ควรทิ้งเครื่องไว้ในจุดรวบรวมหรือจุดรีไซเคิลในท้องถิ่นที่เหมาะสม กำจัดอุปกรณ์ตามข้อกำหนด EC Directive - WEEE (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) (หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบการกำจัดขยะ)

12. ข้อมูลทางเทคนิค

สินค้า	IPL 5800
ขนาดหน้าสัมผัส	3.1 ตร.ซม.
เทคโนโลยี	IPL (Intense Pulsed Light – สำหรับใช้ในบ้าน)
ความยาวคลื่น	475 – 1200 นาโนเมตร
ระดับพลังงาน	สูงสุด 5 จูล / ตร.ซม.
ปรับระดับได้	3 ระดับ
ความเร็วในการยิง	1 วินาที ระดับ 1 2 วินาที ระดับ 2 3 วินาที ระดับ 3
พัลส์ในช่วงเวลา	3 วินาที ระดับ 3
ยิงแสงได้สูงสุด	600,000
ขนาด	16 x 6.5 x 5.5 ซม
น้ำหนัก	ประมาณ 180 กรัม
อุณหภูมิ	การใช้งาน 10 – 40 °C การเก็บรักษา -10 – 70 °C
การใช้งาน	30 – 70%
ความชื้นสัมพัทธ์	การเก็บรักษา 0 – 90% at 55 °C ไม่มีการควบแน่น

ส่วนพลังงาน

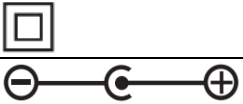หมายเลขรุ่น	YJS024Y-1201800
อินพุต	100 – 240 V~ 50/60 Hz, 0.5 A
เอาต์พุต	12.0 V = = 1.8 A, 21.6 W
ระดับการป้องกัน	อุปกรณ์นี้มีฉนวนสองชั้น (คลาส II)
ชั้ว	
ประสิทธิภาพแอกทีฟโดยเฉลี่ย	≥86.55 %
การใช้พลังงานเมื่อไม่มีโหลด	≤0.08 W

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค

13. การรับประกัน/บริการ

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Beurer”) ให้การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ภายใต้ข้อกำหนดด้านล่างและในขอบเขตที่อธิบายไว้ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการรับประกันดังต่อไปนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการรับประกันตามกฎหมายของผู้ขายตามข้อตกลงการขายกับผู้ซื้อ การรับประกันจะใช้โดยไม่มีผลต่อบทบัญญัติของกฎหมายบังคับเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

Beurer รับประกันการทำงานที่สมบูรณ์แบบและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์นี้ระยะเวลาการรับประกันทั่วโลกคือ 3 ปี นับตั้งแต่การซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่ได้ใช้จากผู้ขาย

การรับประกันมีผลเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยผู้ซื้อในฐานะผู้บริโภคและใช้ในครัวเรือนเท่านั้นกฎหมายเยอรมันจะมีผลบังคับใช้

ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน หากผลิตภัณฑ์นี้พิสูจน์ได้ว่าไม่สมบูรณ์หรือมีข้อบกพร่องในการใช้งานตามข้อกำหนดต่อไปนี้ Beurer จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนการจัดส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขการรับประกันเหล่านี้

ถ้าผู้ซื้อมีความประสงค์ที่จะทำให้การเรียกร้อง การรับประกันพวกเขาควรจะเข้าใกล้ในท้องถิ่นของศูนย์ร้านค้าปลีกในกรณีแรก : ศูนย์แบบราชการ “บริการระหว่างประเทศ” ในการให้บริการที่อยู่

ผู้ซื้อจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเรียกร้องการรับประกัน เช่น พวกเขาสามารถส่งสินค้าได้ที่ไหนและต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การเรียกร้องการรับประกันจะได้รับพิจารณาเมื่อผู้ซื้อสามารถให้ Beurer หรือพันธมิตรของ Beurer ที่ได้รับอนุญาตพร้อมด้วย

– สำเนาใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จการซื้อ

– ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม

สิ่งต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในการรับประกันนี้

- การเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานปกติหรือ การบริโภคของผลิตภัณฑ์
- อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งชำรุดหรือใช้งานหมดจากการใช้งานอย่างเหมาะสม (เช่น แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ ปลอกแขน ซิล อีเล็กโทรด แหล่งกำเนิดแสงอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์นยาขยายหลอดลม)
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ทำความสะอาด จัดเก็บหรือบำรุงรักษาอย่างไม่เหมาะสมและ/หรือขัดต่อข้อกำหนดของคำแนะนำ ในการใช้งานตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การเปิด ซ่อมแซมหรือตัดแปลงโดยผู้ซื้อหรือโดยศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Beurer
- ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งระหว่างผู้ผลิตและลูกค้า หรือระหว่างศูนย์บริการกับลูกค้า
- ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเป็นวินาทีหรือเป็นสินค้าที่ใช้แล้ว
- ความเสียหายสืบเนื่องที่เกิดจากความผิดพลาดในผลิตภัณฑ์นี้ (อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ การเรียกร้อง อาจเกิดขึ้นจากความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบทบัญญัติความรับผิดชอบตามกฎหมายภาคบังคับอื่นๆ)

การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทั้งหมดจะไม่ขยายระยะเวลาการรับประกันไม่ว่าในกรณีใดๆ

<p>บริษัท เบลเมสไทย จำกัด</p> <p>สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 เข่แก้วโก 23 ถ.แก้วโก ๓.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110</p> <p>ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: โทร. 098-280-5777, 038-314-118</p> <p>สำนักงานกรุงเทพฯ: ร้านยาฮอสโปร (Hospro) : 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 065-503-6565</p>
