

1. สิ่งทีปรจมาในกล่อง










- เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System รุ่น IPL10000
- สายไฟ 1 เส้น
- คู่มือแนะนำการใช้งาน ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

คำเตือน !

- อุปกรณ์นี้มิใช่ไว้สำหรับใช้งานส่วนตัวภายในบ้าน ไม่ได้เอาไว้ใช้ในเชิงพาณิชย์
- อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
- เก็บอุปกรณ์ให้พ้นมือเด็ก
- ตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟก่อนการใช้งานทุกครั้ง ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย โปรดคงการใช้งาน
- อย่าใช้อุปกรณ์ใกล้อ่างอาบน้ำ อ่างน้ำ ฝักบัว หรือภาชนะที่บรรจุน้ำและของเหลว เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าลัดวงจร
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย มั่นคง ไม่ตกหล่น
- ห้ามมองที่แสงไฟ IPL ที่ปล่อยออกมาโดยตรง
- ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องระบายอากาศของอุปกรณ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีสิ่งใดปิดหรือขวางช่องระบายอากาศของอุปกรณ์

2. สัญลักษณ์และคำเตือนต่างๆ

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ สามารถพบได้ในคู่มือการใช้งานและตัวอุปกรณ์

	คำเตือนแสดงให้เห็นความเสี่ยงของการบาดเจ็บ
	บันทึกความปลอดภัย ระบุความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
	บันทึกข้อมูลที่มีความสำคัญ
	ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ใกล้น้ำ เช่น ในห้องน้ำ อ่างล้างหน้า ฯลฯ เพื่อป้องกันไฟดูด
	ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งาน
	หลีกเลี่ยงการใช้งานใกล้ดวงตา
	ห้ามใช้อุปกรณ์นี้กับผิวสีแทน หรือ หลังการอาบแดด
	การกำจัดอุปกรณ์ควรเป็นไปตามข้อกำหนดของ WEEE
	ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป

3. จุดมุ่งหมายในการใช้อุปกรณ์

เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System นี้ มีจุดมุ่งหมายสำหรับการใช้กำจัดขนส่วนเกินในร่างกาย สำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งบริเวณที่สามารถกำจัดขนได้ ได้แก่ ขา, รักแร้, Bikini Line, คาง, หน้าท้อง และใบหน้าบริเวณใต้โหนกแก้ม

เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System นี้ ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้กำจัดขนในบริเวณ อวัยวะเพศ, ทวารหนัก หรือ บริเวณหัวนม และควรปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้โดยเคร่งครัด

4. คำเตือน และบันทึกเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

คำเตือน !

ก่อนจะเริ่มการใช้งานอุปกรณ์ ควรศึกษาบันทึกเพื่อความปลอดภัยอย่างละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ได้ โปรดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในที่ปลอดภัย และหยิบใช้ได้สะดวก เพื่อเป็นข้อมูลให้บุคคลอื่น ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์นี้ร่วมกัน

- ห้ามใช้อุปกรณ์ในผู้ที่ตั้งครรภ์ หรือ กำลังให้นมบุตร
- หากพบว่า เมื่อใช้แล้วมีอาการบวมแดง หรือมีรอยไหม้ที่ผิวหนัง ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์นี้โดยทันที
- ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนการใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro ในครั้งแรก ควรทดสอบความไวต่อแสงของผิว (Skin Sensitivity Test) ในพื้นที่ผิวบริเวณเล็กๆก่อน (โปรดศึกษาจากข้อที่ 7)
- ห้ามมองแสง IPL ที่ถูกปล่อยจากตัวไฟโดยตรง เพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตา และให้แน่ใจว่าพื้นที่ปล่อยแสงของตัวไฟนั้น แนบสนิทกับผิวหนังของคุณ
- ห้ามปล่อยแสง IPL ออกไปในอากาศโล่ง
- ศึกษาการเลือกระดับความเข้มของแสงได้จาก “ตารางเลือกระดับความเข้มของแสงที่มีต่อสีและเส้นขน” ที่ข้างกล่อง และทำการเลือกระดับความเข้มของแสงที่เหมาะสมกับสีผิวและเส้นขนของคุณ
- ห้ามใช้เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System ในผู้ที่มีผิวคล้ำ โดยธรรมชาติ เพราะอุปกรณ์นี้อาจมีผลต่อผิว ซึ่งจะทำให้เกิดอาการไหม้เป็นแผล หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของผิวหนังได้
- เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System ใช้ได้ผลดีมากกับเส้นขนสีดำ หรือเส้นขนที่มีเม็ดสีสูง (High Melanin) เช่น ขนสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม จะได้ผลการใช้ที่ดีมาก ส่วนขนสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอ่อน ก็สามารถใช้ได้ผลดี แต่ต้องอาศัยการกำจัดขนหลายรอบ เส้นขนสีแดงก็สามารถ

ใช้ได้ผล แต่เส้นขนสีขาว สีเทา และสีบลอนด์ ใช้ไม่ค่อยได้ผลกับเครื่องกำจัดขนนี้ ซึ่งผลที่ได้นี้เกิดจากการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานหลายคน

- เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System นี้ อาจทำให้สีผิวเปลี่ยนได้ชั่วคราว เช่น ขาวขึ้นชั่วคราว
 - ห้ามแกะอุปกรณ์ภายในด้วยตัวเอง การแกะอุปกรณ์นี้อาจทำให้ได้รับอันตรายจากวงจรไฟฟ้าที่อยู่ภายใน และได้รับอันตรายจากพลังงานของแสง ซึ่งจะทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ และอาจตาบอดได้
- การกระทำต่อไปนี้อาจทำให้ได้รับอันตรายจากวงจรไฟฟ้า**
- ห้ามใช้เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System ขณะอาบน้ำ
 - ห้ามใช้เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System เมื่ออุปกรณ์อยู่ในที่ชื้นหรือเปียก
 - ห้ามใช้เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System เมื่อหล่นน้ำ
 - หากเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System หล่นน้ำ ให้ถอดปลั๊กไฟโดยทันที
 - ห้ามแตะเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System หรือปลั๊กไฟในขณะที่มีมือเปียก

สำคัญ!

- อย่าพยายามแกะเปิดอุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตนเอง นอกจากจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์แล้ว ยังทำให้หมดการรับประกันจากบริษัทอีกด้วย
- อย่าใช้อุปกรณ์นี้ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส
- ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้ หากไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์
- ควรใช้งานอุปกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่คู่มือนี้ระบุไว้เท่านั้น
- ไม่ควรใช้งานอุปกรณ์ หากสายไฟหรือปลั๊กไฟ ชำรุดเสียหาย และควรให้สายไฟอยู่ห่างจากบริเวณที่มีความร้อน
- เมื่อเลิกใช้งาน หลังจากปิดสวิตช์แล้ว ไม่ควรถอดปลั๊กออกโดยทันที ควรรอให้พัดลมระบายอากาศดับลงเสียก่อน
- หลังการใช้งานเสร็จ ควรถอดปลั๊กอุปกรณ์เสมอ
- ควรถอดปลั๊กไฟออกจากตัวเครื่อง ก่อนการทำความสะอาด
- อย่าใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System ร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้แนะนำโดย Beurer
- อย่าใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System หากมีกลิ่นไหม้จากอุปกรณ์
- อย่าใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System หากเครื่องมีการทำงานที่ผิดปกติหรือเกิดความเสียหาย
- อย่าใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System หากพัดลมไม่ทำงาน

- อย่าใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System หากเซนเซอร์ตรวจสอบสีผิว (Skin Color Sensor) แดงหัก เสียหาย
- อย่าใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System หากตัวเครื่องภายนอกแตกหัก หรือตกหล่น
- อย่าใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System หากตัวลิ้นไฟหรือส่วนที่ปล่อยแสง แดงหัก เสียหาย
- อย่าใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System หากสายไฟหรือปลั๊กไฟ เสียหาย

⚠ คำเตือน !

ห้ามใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System หากคุณมีอาการเจ็บป่วย ดังต่อไปนี้

- หากคุณเป็นมะเร็งผิวหนัง (Skin Cancer) หรือเคยมีประวัติว่าเป็นมะเร็งผิวหนังมาก่อน
- หากคุณเป็นโรคลมชัก หรือโรคลมบ้าหมู (Epilepsy)
- หากคุณมีแผลเป็นแบบคีลอยด์ (Keloidal Scars)
- หากคุณเป็นเริม (Herpes) หรือโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)
- หากคุณมีโรคที่เกี่ยวข้องกับแสง เช่น โรคผิวดูดเลือด (Prophyria), Polymorphic, Photodermatosis, ลมพิษแสงอาทิตย์ (Solar Clotting Disorder), Lupus ฯลฯ
- หากคุณมีสภาพผิวที่ผิดปกติ ซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานหรือโรคระบบเผาผลาญอื่นๆ
- หากคุณมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด (Blood Clotting Disorder)

ห้ามใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System หากคุณได้รับยาและการรักษา ดังต่อไปนี้

- ถ้าคุณมีประวัติการใช้ยาที่ทำให้ผิวไวต่อแสง รวมถึง การใช้ยาเดี่ยวรายด์ (เช่น aspirins, ibuprofens, acetaminophen) tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretics, sulfonyluraes, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydeoxi Acids (AHAs), Beta-Hydroxi Acids (BHAs), Retin-A, Accutane และ/หรือ tropical retinoids
- หากคุณกำลัง หรือเพิ่งได้รับการรักษาด้วยกรด AHAs, BHAs, Retin-A, Tropical retinoids หรือกรด Azalac
- หากคุณได้รับยาปฏิชีวนะ Tetracycline ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
- หากคุณได้รับการรักษาด้วย Accutane (Isotretinoin) ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

- หากคุณได้รับยาสเตียรอยด์ ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา
- หากคุณมีการขัดผิว (Skin Exfoliation Treatment) หรือขั้นตอนการปรับผิวให้เรียบ (Skin Smoothing Procedure) ในช่วง 6-8 สัปดาห์ที่ผ่านมา

- หากคุณได้รับการบำบัดรักษาด้วยการฉายรังสี หรือเคมีบำบัด ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา

ห้ามใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System ในพื้นที่ ตามร่างกาย ดังต่อไปนี้

- บริเวณขนในโพรงจมูก และบริเวณลำคอ
- หากคุณมีอุปกรณ์ช่วยเหลือน้ำหนักในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ, อุปกรณ์การกลั่น, เครื่องปั๊มอินซูลิน ฯลฯ
- บริเวณใบหน้าที่อยู่เหนือโหนกแก้ม เช่น รอบๆดวงตา คิ้ว หรือขนตา ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้
- บริเวณหัวนม อวัยวะเพศ ทั้งชายและหญิง หรือบริเวณทวารหนัก
- บริเวณที่มีการเจาะผิวหนัง หรือที่มีโลหะ เช่น ต่างหู หรือเครื่องประดับ
- ผู้ที่มีรอยสัก หรือแต่งหน้าแบบถาวรในบริเวณที่ต้องการกำจัดเส้นขน
- ผู้ที่มีจุดต่างด้า สีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ เช่น กระที่มีขนาดใหญ่ ปานแดงไฟ หรือหูดอยู่ในบริเวณ ที่ต้องการกำจัดเส้นขน
- ถ้าคุณมีประวัติว่าเคยเป็นโรคเริม และโรคสะเก็ดเงิน บริเวณผิวหนังที่ต้องการกำจัดเส้นขน
- ผู้ที่เป็นโรคผิวหนัง หรือเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งผิวหนัง หรือบริเวณดังกล่าวมีอาการบาดเจ็บ ควรรอให้อาการหายดีก่อน
- บริเวณที่คุณต้องการที่จะมีขนขึ้นในอนาคต


ห้ามใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System ในผู้ที่มีผิวสีแทน ผิวดำ หรือผ่านการอาบแดดมา

- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้บนผิวสีแทน หรือเพิ่งผ่านการอาบแดดมา เพราะจะทำให้ผิวหนังไหม้ และเป็นอันตรายได้ หลีกเลี่ยงการออกแดดแรงๆ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์นี้ การใช้อุปกรณ์กับผิวที่เพิ่งผ่านการอาบแดดมา จะส่งผลให้เกิดการไหม้, พุพอง และสีผิวเปลี่ยนได้
- หลังจากการใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System แล้ว 48 ชั่วโมง ให้หลีกเลี่ยงการออกแดดนานกว่า 15 นาที หากจำเป็นต้องออกแดด ควรทาครีมกันแดด อย่างน้อย SPF30 ขึ้นไป


ⓘ หมายเหตุ!

หากผู้ใช้งานไม่แน่ใจว่า มีความปลอดภัยสำหรับตนเองหรือไม่ กรุณาสอบถามแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังของท่าน ก่อนการใช้งาน

5. เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System คืออะไร?

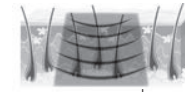

ก่อนการใช้งานเครื่อง Beurer SalonPro System

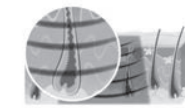

ระหว่างการปล่อยแสง IPL Beurer SalonPro System



ภายหลังการใช้งาน Beurer SalonPro System

อุปกรณ์กำจัดขน Beurer SalonPro System เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสงกำจัดขนในระยะยาว กระบวนการกำจัดเส้นขนด้วยแสง และเลเซอร์นี้ เป็นที่รู้จักกันดี และได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์ ในการใช้งานทั่วโลกมากกว่า 15 ปี ว่าเป็นวิธีที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณเส้นขนได้ในระยะยาว


แสงสามารถกำจัดเส้นขนได้อย่างไร

การกำจัดเส้นขนด้วยแสง ใช้เทคโนโลยี Photothermylysis ในการนำพลังงานแสงมาใช้ เพื่อหยุดการเจริญเติบโตของเส้นขน โดยเส้นขนจะมีการดูดซับพลังงานแสง แล้วแปลงเป็นพลังงานความร้อน

กระบวนการดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นเมื่อแสงถูกส่งไปยังผิวหนัง เม็ดสีที่ขนจะทำกรดูดซับพลังงานในขณะที่ยังมีสีและเนื้อเยื่อโดยรอบยังเย็นอยู่ เมลานินซึ่งเปลี่ยนเป็นเม็ดสีในเส้นขน จะทำหน้าที่ในการดูดซับพลังงานแสง และเปลี่ยนเป็นความร้อน ลงไปทำลายรากขน ในที่สุดจะหยุดการเจริญเติบโตของเส้นขนได้ ดังนั้น ถ้าเส้นขนมีปริมาณเม็ดสีเมลานินมาก เช่น ขนที่มีสีเข้ม จะสามารถดูดซับพลังงานได้มากกว่าขนสีอ่อน ซึ่งจะทำให้ได้ผลในการหยุดการเจริญเติบโตของเส้นขน ได้มีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเอง

แสงกระทบต่อวงจรการเติบโตของเส้นขนได้อย่างไร?

วงจรการเติบโตของเส้นขน มี 3 ขั้นตอน คือ Anagen, Catagen และ Telogen ขั้นตอนเหล่านี้ มีผลสำคัญต่อการทำงานของอุปกรณ์กำจัดขน

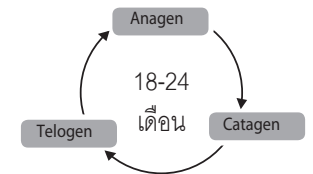

โดย Anagen เป็นระยะการเจริญเติบโตของเส้นขน ในขณะที่ Catagen และ Telogen เป็นช่วงพักการเจริญเติบโตของเส้นขน ซึ่งระยะเวลาที่เส้นขนเจริญเติบโตจนครบวงจร จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล และแต่ละพื้นที่ในร่างกาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ มักจะใช้เวลา 18-24 เดือน

ในช่วงเวลาที่เส้นขนไม่มีการเจริญเติบโต เส้นขนเหล่านี้ (Catagen และ Telogen) จะไม่ได้รับผลจากการปล่อยแสง IPL แต่เส้นขนที่อยู่ในระยะเติบโต (Anagen) จะตอบสนองต่อการใช้งานของอุปกรณ์ได้ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้งานต้องเข้าใจว่า เส้นขนที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตนั้นเหมาะที่จะทำการกำจัดขนที่สุด

สำหรับอุปกรณ์ Beurer SalonPro System ความปลอดภัยต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก


- เทคโนโลยี IPL ของเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System นี้ใช้พลังงานต่ำ จึงทำให้อุปกรณ์นี้ มีความปลอดภัยสูง เทคโนโลยี Intense Pulsed Light (IPL) สามารถที่จะกำจัดเส้นขนในระยะยาวได้ ด้วยการ ใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย ในการกำเนิดแสง และด้วยพลังงานที่ต่ำนี้ ทำให้ลดการเกิดอันตรายและภาวะแทรกซ้อนลงได้ ซึ่งสร้างความปลอดภัยโดยรวมให้กับผู้ใช้งาน

- เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System นี้ช่วยปกป้องผิวของคุณ การกำจัดเส้นขนด้วยแสง IPL จะไม่สามารถใช้ได้กับผิวที่มีสีเข้ม โดยธรรมชาติ โดยที่ภายในอุปกรณ์จะมีเซนเซอร์ตรวจจับสีผิว ซึ่งออกแบบมาเพื่อวัดความราบเรียบของผิว สีผิว และกำหนดการทำงานที่เหมาะสม หากผู้ที่มีสีผิวเข้มเกินไป หรือมีสีแทนมากเกินไป เซนเซอร์ตรวจจับนี้ จะทำให้อุปกรณ์ระงับการทำงานโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System ในส่วนมือจับ มีคุณสมบัติป้องกันรังสี UV เพื่อช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดจากรังสี UV อีกด้วย

- เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System นี้ช่วยปกป้องดวงตาของคุณ อุปกรณ์นี้ ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยในการป้องกันสายตา หากมีการกดปุ่ม ปล่อยแสงในอากาศเปิด แสงจะไม่ออกมาจากอุปกรณ์ การทำงานของปุ่มปล่อยแสงนี้ จะทำงานเมื่อมีการสัมผัสกับผิวหนังเท่านั้น

6. รายละเอียดของอุปกรณ์

6.1 ส่วนฐาน

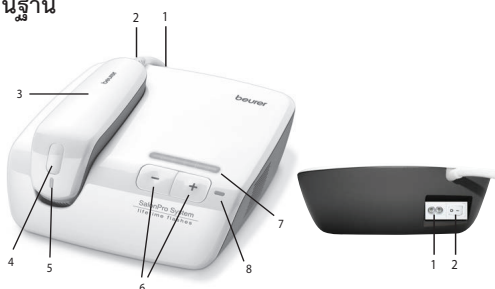

1. ที่เสียบสายไฟส่วนฐาน
2. ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง
3. ส่วนการใช้งานแบบมือจับ
4. ปุ่มปล่อยแสง IPL
5. ไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งาน
6. ปุ่มปรับระดับพลังงาน
7. ไฟแสดงระดับพลังงานของแสง
8. ไฟแจ้งเตือนว่ามีพลังงานในถัปลไฟแล้ว

6.2 ส่วนการใช้งานแบบมือจับ



ปุ่มปล่อยแสง (Trigger Button) อยู่ตรงปลายของส่วนการใช้งานแบบมือจับ โดยแสง IPL จะถูกปล่อย เมื่อกดที่ปุ่มปล่อยแสงนี้ ถัปลไฟ (Cartridge) จะถูกบรรจุอยู่ในส่วนการใช้งานแบบมือจับ ไฟแสดงสถานะ การใช้งานตรงส่วนปลายของมือจับนี้ แสดงสถานะ ดังต่อไปนี้

ไฟแสดงสถานะ ไม่สว่าง	การปล่อยแสง IPL ไม่พร้อมทำงาน
ไฟแสดงสถานะ สว่าง เป็น สีเขียว	การปล่อยแสง IPL พร้อมทำงาน
ไฟแสดงสถานะ สว่าง เป็น สีแดง	การปล่อยแสง IPL ถูกระงับการทำงานเนื่องจากสีผิวไม่เหมาะสม (โปรดดูตารางสีผิวและเส้นขนข้างกล่องหรือในคู่มือการใช้งานนี้)
ไฟแสดงสถานะ สว่าง เป็น สีส้ม	การปล่อยแสง IPL ถูกระงับการทำงานเนื่องจากหน้าสัมผัสของส่วนมือจับ ไม่แนบสนิทกับผิวหนัง
ไฟแสดงสถานะ สว่าง เป็น สีแดงแต่ไฟในสถานะใน ส่วนฐานเป็นสีเขียว	ถัปลไฟไม่ได้ถูกใส่ในส่วนมือจับอย่างเรียบร้อย

6.3 ถัปลไฟ



ถัปลไฟ ของเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System มีเซนเซอร์ตรวจจับสีผิว

โดยการใช้งาน หากผิวมีสีแทน หรือสีเข้ม อาจทำให้อันตรายต่อผิว เช่น เกิดการไหม้, พุพอง และสีผิวเปลี่ยนได้ เพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ เซนเซอร์ตรวจจับสีผิวของเครื่องกำจัดขน จึงทำหน้าที่ตรวจสอบสีผิวก่อนที่จะปล่อยแสง IPL ลงบนผิวก่อนทุกครั้ง โดยถ้าเซนเซอร์ตรวจจับได้ว่า สีผิวมีความเข้มอยู่ในระดับอันตราย เครื่องจะไม่สามารถปล่อยแสง IPL ได้

ซึ่งถ้าหากไฟแสดงสถานะในส่วนมือจับ สว่างเป็นสีแดง แสดงว่าเซนเซอร์ตรวจจับได้ว่า สีผิวของคุณมีสีเข้มเกินกว่าที่จะใช้งานได้ อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ เครื่องกำจัดขนยังมีเซนเซอร์ตรวจจับหน้าสัมผัสกับผิวหนัง เพื่อป้องกันดวงตาอีกด้วย โดยคุณไม่สามารถปล่อยแสง IPL ไปในอากาศว่างๆได้ โดยเมื่อคุณพบไฟแสดงสถานะในส่วนมือจับ สว่างเป็นสีส้ม นั่นแสดงว่า หน้าสัมผัสของส่วนที่ปล่อยแสง ไม่ได้แนบสนิทกับผิวหนังอย่างเพียงพอ หากไฟสถานะดังกล่าว สว่างขึ้น ให้คุณทดสอบกับบริเวณส่วนอื่นในร่างกาย หรือติดต่อแผนกบริการลูกค้า ด้วยจำนวนที่ท่านได้ซื้อมา

นอกจากนี้ ถัปลไฟของเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System ยังมีคุณสมบัติสามารถป้องกัน รังสี UV ได้อีกด้วย

7. ก่อนการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบอุปกรณ์ Beurer SalonPro System ว่าเหมาะสมกับท่าน

⚠ คำเตือน !

ก่อนที่จะใช้งาน เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System ในครั้งแรก ให้ตรวจสอบอุปกรณ์นี้ ว่าเหมาะสมกับคุณ โดยศึกษาจากข้อที่ 4 “คำเตือนและบันทึกเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน” และตรวจสอบระดับพลังงานที่เหมาะสมกับสีผิวและเส้นขนของคุณ จากตารางสีผิวและสีเส้นขน ที่เหมาะสมกับระดับพลังงาน ที่ข้างกล่องนี้ ซึ่งจะแสดงระดับพลังงานแสงที่เหมาะสมกับสีผิว และเส้นขนของคุณ (หากไม่เหมาะสม จะมีสัญลักษณ์ X อยู่ในตาราง)

ขั้นตอนที่ 2 : ทดสอบความไวต่อแสงของผิว (Skin Sensitivity Test)

⚠ คำเตือน !

ให้ดำเนินการทดสอบความไวต่อแสงของผิว ก่อนการใช้งาน เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System

จุดมุ่งหมายของการทดสอบความไวต่อแสงของผิว คือ การกำหนดความเข้มของแสงที่จะใช้กับผิวของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดระดับความเข้มของแสงที่เหมาะสมกับผิวบริเวณที่ต้องการกำจัดขน โดยให้ทำการทดสอบความไวต่อแสงของผิวในทุกๆ บริเวณที่คุณต้องการกำจัดขน ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนที่จะทำการกำจัดขน

ในกรณีนี้ที่ทำการทดสอบความไวต่อแสงของผิวบริเวณใบหน้า ให้ทำการทดสอบในบริเวณที่ไม่มีเส้นขน เช่น ใต้โบหู หรือข้างลำคอ

1. ก่อนทำการกำจัดขน ผิวหนังบริเวณที่ต้องการกำจัดขน ควรได้รับการโกนเส้นขนออก ทำความสะอาด ทำให้แห้ง และต้องไม่มีแป้ง ไม่มีเหงื่อ หรือยาตัวบดกลืน

⚠ คำเตือน !

ห้ามทำความสะอาดบริเวณผิว ด้วยของเหลวที่ไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ หรือ Acetone ก่อนการใช้งาน

2. เตรียมการใช้งานเครื่อง ตามหัวข้อที่ "8.1 เริ่มต้นการใช้งาน" ภายใต้หัวข้อที่ 2 ถึง 5
3. วางส่วนมือจับ ที่มีหน้าสัมผัส ให้แนบกับผิวหนังบริเวณที่ต้องการกำจัดขน และให้มั่นใจว่า หน้าสัมผัสแนบสนิทกับผิวหนัง
4. เมื่อเริ่มเปิดเครื่องในครั้งแรก ระดับพลังงานจะถูกตั้งไว้ที่ระดับ 1 โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องปล่อยแสงครั้งแรกในระดับพลังงานที่ 1 ให้ใช้รีโมทที่ปุ่มปล่อยแสง อุปกรณ์จะทำการฉายแสง IPL ไปยังผิวหนัง โดยแสงจะสว่างจ้าขึ้น และมีเสียง "เปาะ" เบาๆ ซึ่งเป็นเสียงโดยปกติของอุปกรณ์ ผู้ใช้จะรู้สึกถึงความอุ่นที่ผิว และรู้สึกเป็นเหน็บเล็กน้อย ต่อจากนั้น ภายใน 3 วินาที ไฟแสดงสถานะพร้อมจะเป็นสีเขียว อุปกรณ์จะทำการเตรียมพลังงานให้พร้อมสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป
5. ย้ายส่วนการใช้งานแบบมือจับ ไปยังพื้นผิวที่ต้องการทำการทดสอบถัดไป

❗ หมายเหตุ!

ถ้าระดับพลังงานที่ใช้ ไม่ระคายเคืองต่อผิวของคุณ ก็สามารถเพิ่มระดับพลังงานได้ (ที่ละ 1 ระดับ) แต่ถ้าการใช้ระดับพลังงานที่ 1 ระคายเคืองต่อผิวของคุณ ก็ไม่ต้องเพิ่มระดับพลังงาน ให้คงใช้ระดับที่ 1 นี้ต่อไป

6. ระดับพลังงานสามารถเพิ่มได้ทีละ 1 ระดับ โดยกดที่ปุ่มเพิ่มระดับพลังงาน "+" ไฟสถานะระดับพลังงานจะสว่างขึ้นอีก 1 ดวง จากนั้น ให้กดปุ่มปล่อยแสง IPL ในระดับที่ 2 ลงสู่ผิวต่อไป

7. ให้ทำในขั้นตอนที่ 5 และ 6 ซ้ำ (ถ้าไม่รู้สึกผิดปกติ) จนระดับพลังงานขึ้นสูงสู่ระดับที่ 6 และให้หยุดการทดสอบ หากคุณรู้สึกผิดปกติ หรือผิวของคุณมีอาการผิดปกติ เช่น บวมแดงหรือบวมพอง

8. ให้รอผลการทดสอบภายใน 48 ชั่วโมง หากผิวที่ทดสอบมีอาการผิดปกติ (ไม่พบอาการผิดปกติหรือมีสีแดง) คุณสามารถใช้งานเครื่องกำจัดขนในส่วนอื่นได้อย่างเต็มที่ ด้วยระดับพลังงานสูงสุดที่คุณพบ จากการทดสอบความไวต่อแสงของผิว แต่หากผลการทดสอบความไวต่อแสงของผิว พบว่า สภาพผิว มีสีแดง มีอาการพอง หรือบวม อย่าเพิ่งใช้งานอุปกรณ์ในส่วนอื่นของผิว

❗ หมายเหตุ!

อย่าทำการกำจัดขนทั่วทั้งบริเวณ ก่อนที่จะทำการทดสอบผิว เพื่อหา ระดับพลังงานที่เหมาะสม

อย่าทำการทดสอบผิว ในบริเวณที่ทำการทดสอบซ้ำกันอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หลังจากดำเนินการทดสอบ

ขั้นตอนที่ 3 : แผนการกำจัดขน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ด้วยวงจรการเติบโตของเส้นขน อยู่ที่ 18-24 เดือน ในช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้เครื่องกำจัดขน เพื่อให้บรรลุผลในการกำจัดเส้นขนระยะยาว และประสิทธิภาพของการกำจัดเส้นขนจะแตกต่างกันในแต่ละคน ขึ้นอยู่กับ พื้นที่ของร่างกายและสีของเส้นขน

แผนการกำจัดขน ระหว่างวงจรการเจริญเติบโตของเส้นขน

- การกำจัดเส้นขนใน 3-4 รอบแรก ควรห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์
- การกำจัดเส้นขนในรอบที่ 5-7 ควรห่างกันประมาณ 4 สัปดาห์ และการใช้งานในครั้งต่อไป จะทำที่ต่อเมื่อจำเป็น ซึ่งกระบวนการทั้งหมด จะทำให้มีผลสำเร็จในระยะยาว

ระยะเวลาในการกำจัดเส้นขนดังกล่าวนี้ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่ผู้ใช้สามารถกำหนดแผนการใช้งานอุปกรณ์นี้ สำหรับตัวเองได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ตัวเองพึงพอใจ

❗ หมายเหตุ!

การกำจัดเส้นขนบ่อยๆ หลายๆ ครั้ง ภายในสองสัปดาห์ ไม่สามารถช่วยให้กำจัดเส้นขนเร็วขึ้นได้

การบำรุงรักษาผิวโดยทั่วไป หลังจากสามารถทำการกำจัดเส้นขนในระยะยาวได้แล้ว

เนื่องจากฮอร์โมน การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอื่นๆ และการที่ต้องรอให้เม็ดขนอยู่ในสภาวะตื่นตัวเสียก่อน ด้วยเหตุผลนี้ การกำจัดขนซ้ำ จึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา และต้องทำตามแผนการกำจัดขน จนกว่าเส้นขนทั้งหมดจะหมดลง

ขั้นตอนที่ 4 : การเตรียมผิวบริเวณที่ต้องการกำจัดขน ก่อนการใช้งานอุปกรณ์

ก่อนทำการกำจัดขน ผิวหนังควรได้รับการโกนเส้นขนออก ทำความสะอาด ทำให้แห้ง และต้องไม่มีแป้ง ไม่มีเหงื่อ หรือ ยาตัวบดกลืน

⚠ คำเตือน !

ห้ามทำความสะอาดบริเวณผิว ด้วยของเหลวที่ไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ หรือ Acetone ก่อนการใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System

ขั้นตอนที่ 5 : เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสม

ระดับพลังงาน (Energy Level)

ระดับพลังงานจะเป็นสิ่งกำหนดความเข้มของแสง IPL ที่ส่งไปยังผิวหนัง การลดระดับพลังงานต่ำลง และการเพิ่มระดับพลังงานสูงขึ้น จะสอดคล้องกับไฟแสดงสถานะระดับพลังงาน ในส่วนควบคุม ถ้ามีการใช้งานระดับพลังงานที่สูงขึ้น จะส่งผลให้มีโอกาสเสี่ยงอันตราย และผลข้างเคียงมากขึ้น

ถ้าผู้ใช้งาน เคยใช้อุปกรณ์นี้ แล้วไม่รู้สึกระคายเคืองกับพลังงานต่ำสุดที่อุปกรณ์ได้ตั้งไว้ ก็สามารถที่จะเพิ่มระดับพลังงานให้สูงขึ้นได้ ทุกครั้งที่เริ่มการใช้งานเครื่องกำจัดขน จะต้องเริ่มต้นด้วยพลังงานต่ำสุดเสมอ หากไม่ระคายเคืองผิว จึงสามารถเพิ่มระดับพลังงานในครั้งต่อไปทีละหนึ่งระดับ

⚠ คำเตือน !

ห้ามเพิ่มระดับพลังงาน ถ้าผู้ใช้งานมีความรู้สึกระคายเคืองที่ผิว ผิดปกติ ในระหว่างใช้งาน

ห้ามเพิ่มระดับพลังงานในระหว่างการใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้มีความรู้สึกระคายเคือง ซึ่งการระคายเคืองนี้อาจจะเกิดขึ้นได้บางครั้ง หลังทำการกำจัดเส้นขน

⚠ คำเตือน !

ห้ามปล่อยแสง IPL ลงในพื้นที่ผิวหนังเดิมมากกว่า 1 ครั้ง การปล่อยแสงในตำแหน่งเดิมซ้ำๆ จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์

ขั้นตอนที่ 6 : ทำความรู้จักกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน เครื่อง Beurer SalonPro System

เมื่อใช้งานตามคำแนะนำทุกอย่าง ผลข้างเคียงจากการใช้งาน จะพบได้น้อยมาก แต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ทุกๆวิธีการกำจัดขน รวมถึงวิธีการใช้งานที่ออกแบบมาสำหรับใช้ที่บ้าน ก็ยังมีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยง นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมคุณถึงต้องทำความเข้าใจกับความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดจากการใช้งานเครื่องกำจัดขนสำหรับใช้ในบ้านเครื่องนี้ก่อนการใช้งาน

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	โอกาสของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	ผลกระทบ	โอกาสการเกิดผลกระทบ
การใช้งานอุปกรณ์ในผิวเดิมซ้ำๆ หรือวางอุปกรณ์ซ้อนเหลื่อมพื้นที่เดิม	น้อย	ผิวหนังมีภาวะระคายเคืองเล็กน้อย	น้อย
		ผิวมีรอยแดง	น้อย
		ผิวหนังมีความอ่อนไหวมากขึ้น	น้อย
		ผิวหนังได้รับบาดเจ็บหรือไหม้	ไม่บ่อยพบ
		รอยถลอก	ไม่บ่อยพบ
		การเปลี่ยนสีผิว	ไม่บ่อยพบ
		ผิวหนังมีรอยแดงมากและบวม	ไม่บ่อยพบ
		การติดเชื้อ	เล็กน้อย
		รอยขี้	เล็กน้อย

ผิวหนัง มีภาวะระคายเคืองเล็กน้อย

การใช้งานโดยทั่วไป ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะรู้สึกระคายเคืองที่ผิวหนัง ระหว่างการใช้งานเล็กน้อย ในลักษณะเหมือนเป็นเหน็บเบาๆ ความรู้สึกเหมือนเป็นเหน็บนี้ จะเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานในช่วงสุดท้ายเพียงไม่กี่นาที หากผู้ใช้รู้สึกเจ็บผิดปกติ นั่นคือ ผู้ใช้งานไม่สามารถทนต่อการใช้งานของอุปกรณ์นี้ได้ หรืออุปกรณ์อาจจะตั้งระดับพลังงานสูงเกินไป

ผิวหนัง เป็นรอยแดง

ผิวหนังที่เป็นรอยแดง จะจางหายไปภายใน 24 ชั่วโมง หากนานกว่านั้น ควรปรึกษาแพทย์ ภายใน 2-3 วัน

ผิวหนังจะบอบบางมากขึ้น

ผิวหนังบริเวณที่ใช้งาน จะมีความไวต่อสิ่งต่างๆมากขึ้น อาจมีภาวะผิวแห้งหรือผิวแตกได้ง่าย

เป็นแผลและไหม้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้น้อยมากๆ หรือหากเกิดแผลก็ใช้เวลารักษาเพียงไม่กี่สัปดาห์ และแผลจะมีขนาดเล็กเท่านั้น

รอยถลอก

เป็นไปได้น้อยมากที่จะเกิดรอยถลอกขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเกิดรอยถลอกขึ้น มักจะเป็นลักษณะแบนราบ รอยแผลเป็นสีขาวที่ผิวหนัง หากรอยถลอกมีขนาดใหญ่และเป็นสีแดง อาจสร้างความเจ็บปวดได้ รอยแผลเป็นแบบนี้อาจจะต้องเข้ารับการรักษา

ผิวมีอาการบวมแดง

เกิดขึ้นได้น้อยที่ผิวหนังจะมีอาการแดงและบวม แต่สามารถเกิดขึ้นในบริเวณผิวหนังที่มีความบอบบางมากขึ้น ซึ่งการบวมแดงเหล่านี้จะหายไป ใน 2-7 วัน และสามารถแก้ไขได้โดยการใช้น้ำแข็งประคบหลังจากทำการกำจัดขน ให้ทำความสะอาดผิวหนังอย่างอ่อนโยน และควรหลีกเลี่ยงการออกแดด

การติดเชื้อ

เป็นไปได้น้อยมากที่จะเกิดการติดเชื้อขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ หลังจากผิวเกิดการไหม้ หรือเป็นแผลอันเนื่องจากการใช้งานอุปกรณ์

ช้า หรือมีเลือดออกใต้ผิวหนัง

เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้น้อยมาก อย่างไรก็ตามก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ โดยมีรอยขี้สีน้ำตาลเงิน หรือม่วงใต้ผิว ซึ่งโดยปกติจะหายภายใน 5-10 วัน ในบางกรณีอาจจะทำให้สีผิวเป็นรอยสีน้ำตาลใหม่เกิดขึ้นอย่างถาวรได้

ขั้นตอนที่ 7 : สิ่งที่ต้องระวังจากการใช้งาน เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System

สำหรับผู้ใช้งานส่วนใหญ่ ในการใช้งานครั้งแรกสำหรับเครื่องกำจัดขนนี้ จะสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และกำจัดเส้นขนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในระหว่างการใช้งาน หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติ ของอุปกรณ์

- เสียงพัลลัม พัลลัมมีไว้เพื่อการทำให้เครื่องเย็นลง อุปกรณ์อาจจะมีเสียงออกมาเช่นเดียวกับไดร์เป่าผม ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดา
- เสียงดัง “เปาะ” ขณะกดปุ่มปล่อยแสง ฉายแสงในแต่ละครั้ง การกดฉายแสงนั้น อุปกรณ์จะมีเสียง “เปาะ” เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเสียงแฟลชของแสง IPL
- แรงกดของส่วนใช้งานแบบมือจับ การกดแนบกับผิวในส่วนที่ต้องการกำจัดขน จะช่วยให้แสง IPL ทำงานได้อย่างเต็มที่ และยังช่วยด้านความปลอดภัยในการใช้งานของอุปกรณ์ด้วย
- ความรู้สึกอุ่นที่ผิว และรู้สึกเป็นเหน็บเล็กน้อย ระหว่างทำการฉายแสงในแต่ละครั้ง ความรู้สึกอบอุ่นที่ผิวและเป็นเหน็บจากแสง IPL ถือเป็นเรื่องปกติ ซึ่งการใช้งานนั้น ผู้ใช้ต้องใช้งานในระดับพลังงานต่ำๆก่อน ขณะทำการกำจัดขน และหากเวลาผ่านไปหลายชั่วโมง ผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกอุ่นๆที่ผิวได้
- ผิวมีสีแดงเล็กน้อยหรือผิวเป็นสีชมพู ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์ หากสีผิวที่กำลังใช้งาน มีสีชมพูเรื่อๆ ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้ หากผิวหนังมีลักษณะเป็นสีแดง พองๆ หรือไหม้ ควรหยุดใช้ทันที

8. วิธีการใช้งาน Beurer SalonPro System

⚠ คำเตือน !

ถ้าคุณต้องการใช้งานเครื่องกำจัดขนบริเวณใบหน้า ให้อ่านคู่มือการใช้งานในหัวข้อที่ 8.2 ถึง 8.6 ก่อน จากนั้นให้อ่านข้อที่ 8.1 เพื่อเริ่มใช้งาน

8.1 เริ่มต้นการใช้งาน

1. นำอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากกล่อง
2. ตรวจสอบตลับหลอดไฟ ว่าใส่เข้าไปในส่วนใช้งานแบบมือจับแน่นสนิทเรียบร้อยแล้ว

3. เสียบสายไฟเข้ากับตัวฐาน
4. เสียบสายไฟต่อเข้ากับไฟบ้าน จากนั้นเครื่องกำจัดขน ก็พร้อมทำงาน

ⓘ หมายเหตุ!

ก่อนทำการกำจัดขน ผิวหนังควรได้รับการโกนเส้นขน ทำความสะอาด ทำให้แห้ง และต้องไม่มีแป้ง ไม่มีเครื่องสำอางค์ หรือยาติดก้น

⚠ คำเตือน !

ห้ามทำความสะอาดบริเวณผิวด้วยของเหลวที่ไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ หรือ Acetone ก่อนการใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System

5. กดปุ่มเปิดสวิตช์ด้านหลังเครื่อง จะปรากฏไฟแสดงสถานะไฟสว่างขึ้น และเสียงพัลลัมจะดังขึ้น
6. ถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้ว ไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานจะสว่างขึ้น และอุปกรณ์จะตั้งระดับพลังงานต่ำสุด โดยอัตโนมัติ เป็นการแสดงว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งานแล้ว
7. คุณสามารถปรับระดับพลังงานโดยกดที่ปุ่ม “+” หรือ “-” ถ้าต้องการเพิ่มระดับพลังงานให้กดปุ่ม “+” จนกว่าจะถึงระดับพลังงานที่ต้องการ หากต้องการลดระดับพลังงานลง ให้กดปุ่ม “-” เพื่อลดระดับพลังงานลง ระดับพลังงานจะแสดงที่ไฟสถานะ แสดงระดับพลังงานที่ตัวเครื่อง
8. ใช้ส่วนใช้งานแบบมือจับวางบนผิวหนัง ต้องมั่นใจว่าพื้นผิวมีการแบ่งเป็นส่วนๆ และมีลักษณะราบ สำหรับให้อุปกรณ์สัมผัสผิว และต้องมั่นใจว่า ปลายส่วนของส่วนใช้งานแบบมือจับ สัมผัสกับผิวหนังทั้งหมด

ⓘ หมายเหตุ!

หากไฟแสดงสถานะในส่วนมือจับ สว่างเป็น “สีแดง” แสดงว่า เซนเซอร์ตรวจจับได้ว่า สีผิวของคุณมีความเข้มเกินกว่าที่จะใช้งานได้ปลอดภัย ไฟแสดงสถานะในส่วนมือจับ สว่างเป็น “สีส้ม” แสดงว่า หน้าสัมผัสของส่วนที่ปล่อยแสง ไม่ได้แนบสนิทกับผิวหนังอย่างเพียงพอ

9. กดปุ่มปล่อยแสงในส่วนมือจับ อุปกรณ์จะเริ่มทำงานวัดระดับสีผิว ถ้าสีผิวสว่างเพียงพอสำหรับการใช้งานอย่างปลอดภัย อุปกรณ์จะทำการปล่อยแสง IPL ไปยังผิวหนัง จะปรากฏแสงสว่างจ้าขึ้น และมีเสียง “เปาะ” เบาๆ ซึ่งเป็นเสียงโดยปกติของอุปกรณ์ ผู้ใช้จะรู้สึกถึงความอุ่นที่ผิว และรู้สึกเป็นเหน็บเล็กน้อย ต่อจากนั้น อุปกรณ์จะทำการเตรียมพลังงานให้พร้อมสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป ซึ่งใช้เวลาเตรียมพลังงานใหม่ประมาณ 3 วินาที ไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานจะสว่างขึ้น นอกจากนี้ เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System ยังมีคุณสมบัติที่เรียกว่า “Flash-Guide Function” โดยคุณสามารถกดปุ่มปล่อยแสงค้างไว้ แล้วเลื่อนส่วนมือจับไปยังตำแหน่งที่ต้องการกำจัดขนถัดไปได้เลย โดยแสง IPL จะปล่อยออกมาเองโดยอัตโนมัติใน 3 วินาที หมายความว่า

หมายความว่า คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณไม่จำเป็นต้องคอยกดปุ่มทุกครั้งที่ต้องการปล่อยแสง IPL และสามารถทำการกำจัดขนได้รวดเร็วมากขึ้น

คำเตือน !

ห้ามปล่อยแสง IPL เพื่อกำจัดขน ในบริเวณพื้นผิวเดิมซ้ำๆ มากกว่า 1 ครั้ง การกำจัดขนในพื้นที่ผิวเดิมซ้ำๆ จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้

หมายเหตุ!

พื้นที่ผิวที่ใช้งาน

การกำจัดขนควรทำเป็นแถว โดยเคลื่อนอุปกรณ์จากปลายด้านหนึ่งไปยังปลายของแถวอีกด้าน แล้วจึงเปลี่ยนไปแถวอื่นๆ เทคนิคนี้จะช่วยให้ควบคุมการทำงาน ป้องกัน และหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่เดียวกันซ้ำๆ มากกว่าหนึ่งครั้ง หรือซ้อนทับพื้นผิวเดิม คุณสามารถทำเครื่องหมายชั่วคราวที่ผิว เพื่อให้เครื่องสามารถวางตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการทำงานต่อไป

10. นำปลายของส่วนใช้งานแบบมือจับออกจากพื้นผิว และนำไปทาบกับพื้นผิวลำดับต่อไป การทำตำแหน่งบนผิวหนึ่ง จะช่วยให้การวางอุปกรณ์ลงบนพื้นผิวลำดับต่อไปได้ง่ายมากขึ้น ไม่ควรวางซ้ำที่เดิม หรือเกิดการซ้อนทับตำแหน่งพื้นที่เดิม ที่ได้รับการกำจัดเส้นขนไปแล้ว

ภายหลังการใช้งานเครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System

- เมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม เปิด/ปิด
- รอให้พัดลมดับแล้วจึงถอดปลั๊กออกจากไฟบ้าน
- หลังจากใช้แล้ว ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ ตามหัวข้อ 9.1
- หลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บอุปกรณ์กลับเข้าไปในกล่อง และเก็บรักษาไว้ให้ห่างจากน้ำ และความชื้น

8.2 การใช้งานบริเวณใบหน้า

คำเตือน !

อย่าใช้เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System ในบริเวณใบหน้า ในระดับพลังงานมากกว่าระดับที่ 3

อย่าใช้เครื่องกำจัด Buerer SalonPro System ในบริเวณใบหน้า เห็นอกกว่าไหนกแก้ม หรือใกล้ดวงตา คิ้ว หรือขนตา ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้

อย่าใช้เครื่องกำจัดขนในบริเวณ ขนในโพรงจมูก และบริเวณลำคอ

สภาพผิวบริเวณใบหน้านั้นมีความบอบบาง และต้องการการดูแลรักษาอย่างพิเศษ โปรดศึกษาคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ จึงขอแนะนำให้คุณเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องกำจัดขนบริเวณร่างกาย ก่อนการใช้งานในบริเวณใบหน้า และบริเวณอื่นๆ เช่น ลำคอ กราม ฯลฯ

พื้นที่ในบริเวณใบหน้าภายใต้ไหนกแก้ม เช่น บริเวณหนวด คาง เคราและคอ สามารถใช้เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System ได้

1. ควรที่จะทำการทดสอบความไวต่อแสงของผิว ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนทำการกำจัดขน (ศึกษาข้อใน หัวข้อที่ 7 ขั้นตอนที่ 2) การทดสอบความไวต่อแสง ควรกระทำในบริเวณหน้า ที่ไม่มีขน เช่น ใต้ใบหู หรือบริเวณข้างลำคอ เพื่อค้นหาระดับพลังงานที่เหมาะสม

คำเตือน !

อย่าทำการทดสอบในบริเวณที่ทำการทดสอบซ้ำ อย่างน้อยก็จนกว่า 1 สัปดาห์ หลังจากดำเนินการทดสอบ

2. มาร์คตำแหน่งที่ต้องการกำจัดขน ด้วยอายไลเนอร์สีขาว เพื่อป้องกัน การปล่อยแสง IPL ซ้อนทับตำแหน่งพื้นที่เดิม ที่ได้รับการกำจัดเส้นขนไปแล้ว
3. ใช้กระจกช่วย จะทำให้วางตำแหน่งกำจัดขนในบริเวณใบหน้าได้อย่างถูกต้อง
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ!

ขนที่เกิดบริเวณใบหน้า เป็นผลมาจากฮอร์โมน ซึ่งหมายถึง คุณจะต้องใช้การกำจัดขนในบริเวณใบหน้าหลายครั้ง ถึงจะได้ผลลดลงอย่างถาวรจนเป็นที่น่าพอใจ

8.3 การใช้งานบริเวณหนวด (ริมฝีปากบน)

การวางตำแหน่งในการกำจัดขน (แสดงตามรูปภาพด้านข้าง) ให้กดปุ่มปล่อยแสง IPL ในทุกจุดที่มาร์กไว้ หลีกเลี่ยงการใช้งานบริเวณจมูก ริมฝีปาก และในพื้นที่ละเอียดอ่อน



หมายเหตุ!

คุณสามารถเม้มริมฝีปากของคุณ เพื่อให้ผิวในบริเวณริมฝีปากบนตึงขึ้น หรือให้ใช้อายไลเนอร์สีขาวเขียนในบริเวณริมฝีปากบน เส้นสีขาวทำให้มั่นใจได้ว่า ระดับพลังงานของแสง IPL จะสะท้อนไปไม่ถึงริมฝีปากของคุณ ซึ่งจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับริมฝีปากของคุณได้

8.4 การใช้งานบริเวณแก้ม และขากรรไกร

การวางตำแหน่งในการกำจัดขน แสดงตามรูปภาพด้านข้าง ให้กดปุ่มปล่อยแสง IPL ในทุกจุดที่มาร์กไว้ จากแก้มหรือขากรรไกร ไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป



8.5 การใช้งานบริเวณลำคอ และคาง

การวางตำแหน่งในการกำจัดขน

(แสดงตามรูปภาพด้านข้าง)

ให้กดปุ่มปล่อยแสง IPL ในทุกจุดที่มาร์กไว้ จากลำคอ หรือคาง ไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป



หมายเหตุ!

ผิวในบริเวณต่ำกว่าลำคอ มีความละเอียดอ่อนมาก คุณควรระมัดระวังไม่ให้มีการปล่อยแสง IPL ซ้อนทับในบริเวณเดิมซ้ำๆกัน

8.6 การดูแลใบหน้าหลังการกำจัดขน

- ทาโลชั่นที่สกัดจากธรรมชาติ เช่น โลชั่นว่านหางจระเข้
- ห้ามใช้สครับขัดผิว โลชั่นผิวขาว หรือ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังการกำจัดขน เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวได้
- อย่างน้อย 48 ชั่วโมงหลังการกำจัดขน ให้หลีกเลี่ยงการออกแดด นานกว่า 15 นาที หากจำเป็นต้องออกแดด ต้องทาครีมกันแดดที่มี SPF 30 ขึ้นไป
- อย่าทำการกำจัดขน โดยการแว็กซ์ หรือใช้แหนบถอน หลังจากกำจัดขนด้วยเครื่อง Beurer SalonPro System แล้ว โปรดจำไว้ว่า จะต้องใช้เครื่องกำจัดขน ให้สัมพันธ์กับวงจรการเจริญเติบโตของเส้นขน เพื่อเห็นผลดูร่วงลงอย่างถาวร

9. การดูแล และบำรุงรักษา เครื่อง Beurer SalonPro System

9.1 การทำความสะอาด

หลังจากการใช้งานอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลายของส่วนใช้งานแบบมือจับ

สำคัญ!!

ห้ามนำส่วนใดๆของอุปกรณ์ไปสัมผัสน้ำ

- ถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาด
- ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำความสะอาดพื้นผิวอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลายของส่วนใช้งานแบบมือถือ

9.2 การเปลี่ยนดลัไฟ

ดลัไฟในเครื่องรุ่นนี้ สามารถฉายแสงได้มากถึง 250,000 ครั้ง ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานแบบปกติ ได้มากถึง 40 ปี (สำหรับผู้ใช้ 1 คน กำจัดขนทั่วร่างกาย ได้แก่ ขา แขน ได้วงแขน Bikini Zone และ ใบหน้า) นั่นแสดงว่า ดลัไฟรุ่นนี้ ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยน *ดลัไฟสามารถเปลี่ยนได้ในกรณีที่แสงออกมามีขนาดใหญ่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย

วิธีเปลี่ยนดัดไฟ

1. กดปุ่ม เปิด / ปิด เพื่อเปิดอุปกรณ์และถอดสายไฟออกจากตัวเครื่อง
2. จับทางด้านข้างของดัดไฟทั้งสองข้าง แล้วดึงเบาๆออกจากช่องใส่ดัดไฟ
3. แคะห้อดัดไฟตัวใหม่ และใส่ดัดไฟตัวใหม่ลงในช่องใส่ดัดไฟ

10. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

“อุปกรณ์ไม่เริ่มทำงาน”

- ตรวจสอบว่า อุปกรณ์มีการต่อสายไฟที่ตัวอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว
- ตรวจสอบว่า ต่อสายไฟเข้ากับปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้ว

“ไม่มีแสงออกมา เมื่อกดปุ่มปล่อยแสง”

- ต้องมั่นใจว่า ส่วนมือจับที่ปล่อยแสงแนบชิดกับผิวดีแล้ว เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เพราะอุปกรณ์จะฉายแสงเฉพาะกรณีที่อุปกรณ์แนบสนิทกับผิวเท่านั้น
- ตรวจสอบส่วนที่ควบคุม หากไฟแจ้งเตือนส่วนมือจับ เป็น “สีแดง” หมายความว่า สีผิวของผู้ใช้มีลักษณะเข้มเกินไป หากใช้งานจะเกิดอันตรายได้ ลองทดสอบใช้อุปกรณ์กับพื้นผิวในบริเวณอื่น หรือติดต่อฝ่ายบริการของตัวแทนจำหน่าย
- หากเป็นในกรณีที่ไฟแสดงระดับพลังงานสีเขียวทั้ง 6 ดวง กระพริบพร้อมๆกัน ให้ทำการรีเซ็ตเครื่อง โดยทำการปิดเครื่องและเปิดใหม่ หากยังไม่หาย ให้ทำการ ติดต่อฝ่ายบริการของตัวแทนจำหน่าย
- ตรวจสอบที่ดัดไฟ ที่ส่วนมือจับ ไฟแสดงสถานะ สว่างเป็น “สีแดง” แต่ไฟแสดงสถานะในส่วนตัวเครื่องเป็น “สีเขียว” แสดงว่า ดัดไฟ ไม่ได้ถูกใส่ลงอย่างเรียบร้อย ให้ใส่ดัดไฟลงไปในส่วนมือจับใหม่ ให้เรียบร้อย



คำเตือน !

ห้ามแกะอุปกรณ์ หรือ ซ่อมแซมด้วยตัวเอง การเปิดอุปกรณ์อาจจะทำให้เกิดอันตรายจากวงจรไฟฟ้าที่อยู่ภายใน หรือ จากพลังงานแสง ซึ่งจะทำอันตรายต่อร่างกาย และทำให้ตาบอดได้

11. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. อุปกรณ์นี้จะใช้งานได้จริงหรือไม่?

ใช้ได้ผลจริง - ในการทดลองทางการแพทย์ อุปกรณ์นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เครื่องกำจัดขน Beurer SalonPro System มีความปลอดภัยในการกำจัดเส้นขนในระยะยาว

2. ร่างกายส่วนใดที่ใช้ได้บ้าง?

อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับทุกส่วนของร่างกาย ที่ต้องการกำจัดเส้นขน โดยการใช้งานโดยปกติ ได้แก่ ส่วนที่เป็นขา ไต้วงแขน แขน ปีกินีขน และใบหน้าภายใต้หมวกแก้มลงมา

3. ระยะเวลาในการใช้งานฉายแสง ในแต่ละครั้งนานเท่าไร?

เวลาที่ใช้งานจะขึ้นอยู่กับพื้นผิว เช่น บริเวณขาทั้งหมด จะใช้เวลาประมาณ 8 นาที หรือ ไต้วงแขน จะใช้เวลาประมาณ 0.6 นาที โดยทั่วไปเมื่อทำทั้งร่างกายจะใช้ระยะเวลาประมาณ 26 นาทีเท่านั้น เพราะอุปกรณ์นี้จะทำงานด้วยพลังงานทางไฟฟ้า สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานานพอ สำหรับการกำจัดเส้นขนในทุกส่วนของร่างกายได้ตามที่ต้องการ

4. การใช้งานอุปกรณ์นี้ ปลอดภัยหรือไม่?

อุปกรณ์นี้ ถูกออกแบบด้านความปลอดภัยในการใช้งานส่วนบุคคลและผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ทำให้อุปกรณ์นี้ได้มาตรฐาน แต่เช่นเดียวกับอุปกรณ์ด้านผิวหนัง หรืออุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ แต่การใช้งาน ต้องทำตามข้อปฏิบัติและทำตามคู่มือที่กำหนดไว้

5. อุปกรณ์นี้ทำให้เจ็บปวดได้หรือไม่?

ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ จะรู้สึกอุ่นๆ ที่เวลาฉายแสง ในผู้ใช้ที่มีเส้นขนที่หนาและดำ อาจจะรู้สึกเจ็บบ้าง บางครั้งที่ใช้งานสำหรับการใช้งาน จะสามารถตั้งระดับพลังงานได้ 6 ระดับ เพื่อเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับผู้ใช้

6. การใช้งานควรใช้บ่อยแค่ไหน?

การกำจัดเส้นขนในแต่ละส่วน ควรทำทุกๆ 2 สัปดาห์แรก สำหรับครั้งแรก ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม ถึงครั้งที่สี่ หลังจากนั้น การกำจัดเส้นขนจะทำเมื่อมีเส้นขนเกิดขึ้นมาใหม่ ทำจนกว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ

7. อุปกรณ์นี้ ใช้ได้ผลกับ เส้นขนที่มีสีขาว สีเทา หรือสีบลอนด์หรือไม่?

อุปกรณ์นี้ใช้ได้ผลมากที่สุดกับเส้นขนสีเข้มๆ หรือเส้นขนที่มีองค์ประกอบของเม็ดสีมาก เมลานินเป็นเม็ดสีที่ทำให้เกิดสีเส้นขนและสีผิว เมลานินจะดูดซับพลังงานของแสง สีที่ตอบสนองดีที่สุด คือ “สีดำ” และ “สีน้ำตาลเข้ม”

แม้ว่า เส้นขนสีน้ำตาลและเส้นขนสีน้ำตาลอ่อน จะมีการตอบสนองต่อการทำงาน แต่ก็ต้องใช้เวลาในการกำจัดเส้นขนนานกว่าปกติ เส้นขนสีแดง อาจจะทำให้อุปกรณ์ทำงานได้บ้างเล็กน้อย ส่วนสีขาว สีเทา หรือสีบลอนด์ จะไม่มีการตอบสนองต่ออุปกรณ์ ทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้

8. ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์นี้ กับผิวสีน้ำตาล หรือผิวสีดำได้หรือไม่?

อย่าพยายาม ใช้อุปกรณ์นี้กับคนที่ผิวสีเข้มตามธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถทำงานได้ อุปกรณ์นี้ใช้หลักการของแสงในการทำงาน เพื่อกำจัดเส้นขนส่วนที่ไม่ต้องการออกไป โดยมีการวัดระดับสีเส้นขนกับสีผิว ในการทำงานกับผิวที่มีสีดำเข้ม จะทำให้เสี่ยงต่อการทำให้ผิวไหม้ พุพอง

และสีผิวเปลี่ยนได้ เพราะตัวตรวจจับสีผิว ที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์ จะทำการวัดเทียบระดับสีผิว ก่อนการเริ่มต้นทำงาน และมีการเทียบสีในระหว่างการฉายแสง หากมีการใช้งานกับผู้ใช้ที่มีผิวสีเข้ม ตัวตรวจจับจะไม่สามารถเทียบสีผิวในระหว่างการฉายแสงได้

9. ผู้ชายสามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้หรือไม่?

เนื่องจากอุปกรณ์ถูกออกแบบมาสำหรับผู้หญิง แต่ผู้ชายก็สามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม เส้นขนของผู้ชายชนิดที่ขึ้นบนหน้าอก ก็ต้องใช้เวลาในการกำจัดขนหลายครั้ง มากกว่าการกำจัดเส้นขนของผู้หญิง

10. จะเห็นผลสำเร็จของการกำจัดขนระยะยาวเมื่อใด?

เนื่องจากการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้แสงเป็นพื้นฐาน หรืออุปกรณ์ที่ใช้เลเซอร์ จะไม่แสดงผลในทันทีทันใด และในความเป็นจริง ผู้ใช้ไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้งาน บางครั้งเส้นขนอาจจะเกิดขึ้นอีกหลังจากการใช้งานไปแล้ว 2 สัปดาห์ แต่เส้นขนนั้นก็จะหลุดร่วงไปเอง แต่เส้นขนก็อาจจะเกิดขึ้นอีกในช่วงเวลาถัดมา นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลัก ที่ทำให้ต้องมีการกำจัดเส้นขนหลายรอบ เพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการ

11. ทำไมเส้นขนยังขึ้นอีก เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์?

เป็นเรื่องปกติที่เส้นขนจะขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ ภายหลังจากที่กำจัดเส้นขน กระบวนการเกิดขึ้นเรียกว่า “การขับออกมา (Ejection)” และจะเกิดขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ และจะเห็นเส้นขนร่วงออกมาเล็กน้อย เช่นเดียวกับการที่เส้นขนร่วงเองตามธรรมชาติ กรณีนี้เกิดขึ้นได้กับปริมาณเส้นขนส่วนหนึ่งที่สูญเสียคุณสมบัติ หรือการเติบโตที่แตกต่างออกไป ซึ่งไม่ใช่ผลกระทบของการใช้งานอุปกรณ์ เส้นขนเหล่านี้จะต้องถูกกำจัดออกไป และเป็นเหตุที่ทำให้ต้องใช้อุปกรณ์ในการกำจัดขนหลายครั้ง เพื่อให้ได้ผลที่ที่ต้องการ

12. ได้ยินมาว่า เส้นขนส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากการกำจัดเส้นขน ด้วยแสง IPL นั้น จะมีลักษณะ บางและเล็ก?

ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ ซึ่งมีรายงานจำนวนหนึ่งของผู้เสริมความงามกับแพทย์ เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น โดยปกติแล้ว เส้นขนเหล่านี้คือ ชิ้นส่วนเล็กๆของเส้นขนดั้งเดิม หากใช้การกำจัดเส้นขนอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่พอใจ

13. ถ้าผิวเกรียม เพราะถูกแดด ทำไมไม่สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้?

ห้ามใช้อุปกรณ์บนผิวสีแทน หรือหลังวันที่อาบแดด ผิวสีแทนและผิวที่ผ่านการอาบแดด จะมีปริมาณเม็ดสีเมลานินปริมาณมาก ด้วยคุณสมบัตินี้ ชนิดของสีผิวและลักษณะผิว เหล่านี้จะทำให้สีผิวเป็นสีแทนได้อย่างรวดเร็ว จำนวนของเมลานินที่มากขึ้น ทำให้ผิวมีความเสี่ยงสูงจากผลกระทบในการใช้อุปกรณ์ นั่นคือ อาการไหม้ อาการพุพอง และสีผิวมีการเปลี่ยนแปลง เช่น อ่อนลง หรือ เข้มขึ้น

14. การใช้อุปกรณ์ในระยะยาว เป็นอันตรายต่อผิวของผู้ใช้หรือไม่?

การใช้งานแสงและพลังงานเลเซอร์ ในการดูแลความงาม ได้รับการทำเป็นเอกสารวิจัยกว่า 15 ปี จากระดับมืออาชีพและเป็นวารสารที่เทียบเท่ากัน วารสารและสถาบันที่เคารพนับถือกันดี เช่น เมโยคลินิก ซึ่งวารสารเหล่านี้ รวมถึงสถาบัน ไม่ได้รายงานผลข้างเคียงหรือความเสียหายใดๆ จากการใช้งานในระยะยาวของแสง IPL และเลเซอร์เลย

15. สามารถใช้อุปกรณ์นี้ กำจัดเส้นขนบริเวณคาง หรือ ผิวหน้าได้หรือไม่?

สามารถนำมาใช้สำหรับการกำจัดเส้นขนบนใบหน้าได้ แต่การใช้งานนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานบริเวณรอบๆ หรือใกล้ดวงตา และร่างกายส่วนบอบบางอื่นๆ เช่นกัน ควรหลีกเลี่ยงการ - สัมผัสแสงแดด ทั้งก่อนและหลังการกำจัดเส้นขน โดยการคลุมผ้า หรือใช้ครีมกันแดด ที่มีค่า SPF สูงกว่า 50 และ ควรใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังกำจัดเส้นขนเป็นเวลา 3 สัปดาห์

16. ต้องป้องกันตัวเองจากแสงแดดนานเท่าไร ก่อนใช้งานอุปกรณ์นี้?

ควรป้องกันตัวจากแสงแดด ประมาณ 4 สัปดาห์ ก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม หากไม่มั่นใจเกี่ยวกับการป้องกันตนจากแสงแดด ควรสอบถามแพทย์ หรือ ตัวแทนจำหน่าย

17. ควรทำสิ่งใดบ้าง ก่อนที่จะใช้งาน?

ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดด โดยตรง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF มากกว่า 50 จะช่วยป้องกันได้เช่นเดียวกับการใช้ผ้าปกคลุมผิว บริเวณที่ต้องการกำจัดเส้นขน ควรได้รับการทำความสะอาดด้วยสบู่อ่อนๆ และควรโกนขนออกให้เรียบร้อย

18. ควรดูแลผิวที่ผ่านการกำจัดเส้นขนอย่างไร?

ผิวหนึ่งที่ผ่านการกำจัดเส้นขน สามารถทำความสะอาดและบำรุงรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบมาตรฐาน การดูแลเป็นพิเศษ คือ ต้องหลีกเลี่ยงแสงแดด หากไม่มีเครื่องป้องกันแดด การป้องกันทำได้โดยการใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF มากกว่า 50 และปิดผ้าคลุมด้วยผ้า จะป้องกันตัวเองจากแสงแดดได้




19. ควรดึงเส้นขนออกจากบริเวณที่กำลังกำจัดเส้นขนหรือไม่?

ไม่ควร เพราะเส้นขนดังกล่าว จะร่วงไปเองหลังจากผ่านไป 2 สัปดาห์

12. การกำจัด

โปรดกำจัดอุปกรณ์ให้สอดคล้อง ตามระเบียบการจัดการของระเบียบว่าด้วยการจัดการเศษเหลือทิ้งจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)

13. ข้อมูลทางเทคนิค

พื้นที่รักษานิ้ว	7 เซนติเมตร	
เทคโนโลยี	IPL แสงความเข้มสูง	
ความยาวของคลื่น	475-1200 mm	
ระดับพลังงานสูงสุด	>5 J/cm	
จำนวนของระดับพลังงาน	6	
แบตเตอรี่	100-240V AC, 50-60 Hz	
ความเร็ว	1 ครั้ง ทุกๆ 3 วินาที	
จำนวนครั้งในการยิงแสง	250,000 ครั้ง	
อุณหภูมิ	การทำงาน	10-40 องศาเซลเซียส
	การจัดเก็บ	-10-70 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์	การทำงาน	30-70% rel. h.
	การจัดเก็บ	0-90% rel. h. at 55 องศาเซลเซียส
ระดับของอุปกรณ์		
WEEE		
conformity marking		
อ่านคำแนะนำก่อนการใช้งาน		

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลเมทไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.แก้วโกโล 23 ถ.แก้วโกโล ต.สุรศักดิ์

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 098-2805777



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
fanpage: beurerthailand



line: @beurerthai