

เรียนลูกค้า

ขอขอบคุณที่เลือกสินค้าของเรา ผลิตภัณฑ์ของเรามีจุดเด่นเรื่องคุณภาพ ผ่านการทดสอบอย่างละเอียด อาทิเช่น อุปกรณ์ให้ความอบอุ่น เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องนวด อุปกรณ์ด้านความงาม อุปกรณ์สำหรับเด็ก และเครื่องกรองอากาศ โปรดอ่านคู่มือโดยละเอียดก่อนใช้งาน และเก็บรักษาสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานบอยเรอร์

เครื่องหมายและสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะมีปรากฏบนอุปกรณ์ บนบรรจุภัณฑ์และบนคู่มือ ในการแนะนำสำหรับการใช้งานนี้บนบรรจุภัณฑ์และบนแผ่นประเภทของอุปกรณ์ :

	กรุณาอ่านคำแนะนำ		ห้ามซักรีด
			ซักรีดด้วยอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 40°C
			ซักรีดด้วยอุณหภูมิลดลงไม่เกิน 30°C ในระดับบะหมี่นุ่มเป็นพิเศษ
	ห้ามใช้เข็มหมุดกับอุปกรณ์		ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาว
			ห้ามปั่นแห้ง หรืออบ
	ห้ามพับ หรือมัด		ห้ามรีด
			รีดโดยใช้ความร้อนปานกลาง
	ไม่ควรใช้กับเด็กเล็ก (อายุ 0-3 ปี)		ห้ามซักรีดแห้ง
	โปรดกำจัดบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		ผู้ผลิต
	ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปและประเทศที่เกี่ยวข้อง		ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิคของ EAEU
	ผลิตภัณฑ์นี้มีมาตรฐานการป้องกันผู้ใช้งานไฟฟ้าช็อตทำได้ด้วยฉนวนสองระดับ (แบบสองชั้นหรือแบบเสริม) โดยไม่จำเป็นต้องต่อสายดิน		โปรดกำจัดอุปกรณ์ตามข้อกำหนด EC - WEEE (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์)

	สัญลักษณ์ KEMA-KEUR บันทึกความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
	ส่วนที่เป็นสิ่งทอของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดที่เคร่งครัดในเชิงระบบนิเวศมนุษย์ ตามมาตรฐานของ Oeko-Tex 100 ได้รับการตรวจสอบโดยสถาบันวิจัย Hohenstein
	คำเตือน: คำเตือนเรื่องความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดความอันตรายต่อสุขภาพ
	ข้อควรระวัง: ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า / อุปกรณ์เสริม
	หมายเหตุ: ข้อมูลสำคัญ

1. ภายในบรรจุภัณฑ์

ก่อนการใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายที่มองเห็นได้กับ


อุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม และหลังจากนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกแล้ว

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ อย่าใช้อุปกรณ์ และติดต่อผู้ค้าปลีกของคุณ หรือที่อยู่ฝ่ายบริการลูกค้าที่ระบุไว้

- 1 แผ่นให้ความอบอุ่น
- 1 ฝาคลุมชั้นนอก (บล็อก)
- 1 ตัวควบคุมอุณหภูมิ
- 1 คู่มือการใช้งาน

1.1 คำอธิบายตัวอุปกรณ์

1. ปลั๊กไฟ
2. สายไฟ
3. ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ
4. จอแบบเรืองแสงสำหรับแสดงผลการตั้งค่าอุณหภูมิ
5. สวิตช์แบบเลื่อนสำหรับเปิด/ปิด และตั้งค่าอุณหภูมิ
6. ข้อต่อสำหรับเสียบเข้ากับแผ่นให้ความอบอุ่น

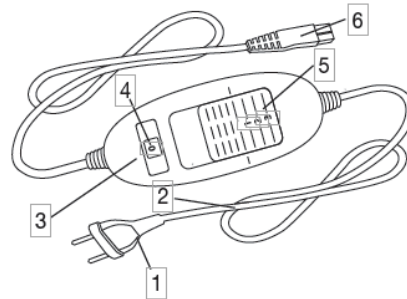

2. คำแนะนำสำคัญในการใช้งานอุปกรณ์

คำเตือน

- การไม่ปฏิบัติตามหมายเหตุต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือวัสดุเสียหาย (ไฟฟ้าช็อต, ผิวหนังไหม้, ไฟไหม้)

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอันตรายต่อไปนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องสุขภาพของคุณและผู้อื่นเท่านั้น แต่ช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์อีกด้วย ด้วยเหตุนี้โปรดใส่ใจกับคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเหล่านี้ และเมื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ให้กับผู้อื่น โปรดมอบให้พร้อมกับคู่มือการใช้งานที่แนบมาด้วย

- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้โดยผู้ที่ไม่ไวต่อความปลอดภัย หรือผู้ที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจไม่สามารถตอบสนองต่อความปลอดภัยได้ (เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วย ผู้ที่มีผิวหนังเป็นแผลเป็นในบริเวณที่จะใช้แผ่นให้ความอบอุ่น หรือ หลังจากรับประทานยาบรรเทาอาการปวด หรือดื่มแอลกอฮอล์)
- เด็กเล็ก (อายุ 0-3 ปี) ไม่สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบสนองต่อความปลอดภัยสูงเกินไปได้
- เด็กเล็ก (อายุ 3-8 ปี) ไม่สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ เว้นแต่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ตั้งค่าควบคุม และเด็กที่ใช้จะต้องได้รับคำแนะนำอย่างเพียงพอเกี่ยวกับวิธีใช้แผ่นให้ความอบอุ่นอย่างเคร่งครัด
- เด็กที่อายุมากกว่า 8 ปี หรือผู้ที่ต้องทักษะทางร่างกาย ขาดทักษะทางประสาทสัมผัส หรือสภาวะทางจิตบกพร่อง และผู้ที่ขาดประสบการณ์ หรือความรู้ อาจใช้แผ่นให้ความอบอุ่นนี้ได้หากพวกเขาได้รับการดูแล และได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้แผ่นให้ความอบอุ่นอย่างปลอดภัย รวมถึงสามารถตระหนักได้ถึงความเสี่ยงที่อาจตามมาจากการใช้งาน
- ห้ามให้เด็กเล่นแผ่นให้ความอบอุ่น
- ห้ามให้เด็กเป็นผู้ทำความสะอาด และบำรุงรักษาอุปกรณ์ เว้นแต่จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
- แผ่นให้ความอบอุ่นนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในโรงพยาบาล
- ห้ามใช้ของมีคมกับแผ่นให้ความอบอุ่นนี้
- ห้ามใช้งานขณะตัวแผ่นให้ความอบอุ่นนี้ถูกพับ หรือ มัดอยู่
- ห้ามใช้งานขณะแผ่นให้ความอบอุ่นยังเปียกอยู่
- แผ่นให้ความอบอุ่นนี้ต้องใช้ร่วมกับตัวควบคุมอุณหภูมิที่ระบุไว้บนฉลากเท่านั้น
- สนามไฟฟ้า และ สนามแม่เหล็กที่ปล่อยออกมาจากแผ่นให้ความอบอุ่นนี้อาจรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ อย่างไรก็ตามขอบเขตของสนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็กที่ปล่อยออกมายังอยู่ในช่วงที่ดี โดยความแรงของสนามไฟฟ้า: สูงสุด 5000 V / m ความแรงของสนามแม่เหล็ก: สูงสุด 80 A / m ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก: สูงสุด 0.1 มิลลิเวินาที โปรดปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นหัวใจของคุณก่อนใช้งานอุปกรณ์นี้
- ห้าม ดึง บิด หรืออสรายเคเบิล
- โปรดตรวจสอบแผ่นให้ความอบอุ่นเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบการสึกหรอหรือความเสียหาย หากมีอาการดังกล่าวปรากฏให้เห็น หรือหากมีการใช้แผ่นให้ความอบอุ่นไม่ถูกต้อง รวมถึงหากแผ่นให้ความอบอุ่นไม่ปล่อยความร้อนอีกต่อไป ควรจะนำอุปกรณ์ไปตรวจสอบโดยผู้จำหน่าย ก่อนที่จะทำการเริ่มใช้งานอีกครั้ง
- หากสายไฟเชื่อมต่อหลักของอุปกรณ์เสียหาย ให้ถอดออกจากตัวเครื่องแล้วนำไปกำจัดก่อน หากไม่สามารถถอดออกได้ต้องกำจัดอุปกรณ์
- ในขณะที่เปิดแผ่นให้ความอบอุ่นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ :
 - ห้ามวางสิ่งของมีคมบนแผ่นให้ความอบอุ่น

- ห้ามวางสิ่งของที่มีความอบอุ่น เช่น ขวดน้ำอบอุ่น หรือสิ่งที่คล้ายกัน บนตัวแผ่นให้ความอบอุ่น
- ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ในตัวควบคุมจะสร้างความอบอุ่นขึ้นเมื่อเปิดใช้งาน ด้วยเหตุนี้จึงต้องไม่นำสิ่งของที่มีความอบอุ่นมาวางทับบนตัวควบคุม อุณหภูมิ หรือบนแผ่นให้ความอบอุ่นขณะกำลังใช้งาน
- ผู้ใช้งานควรหมั่นสังเกต หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน การทำความสะอาด และการบำรุงรักษา การจัดเก็บ
- หากคุณมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์ของเรา กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

3. วัตถุประสงค์การใช้งาน

⚠️ ข้อควรระวัง

แผ่นให้ความอบอุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อทำให้ร่างกายมนุษย์อบอุ่นขึ้นเท่านั้น

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับฟิล์มป้องกัน และ/หรือ ฉนวนของสาย

เคเบิล อย่าใช้แผ่นให้ความอบอุ่นร่วมกับน้ำมันหอมระเหย หรือโลชั่น

📌 หมายเหตุ สำหรับ HK 63

แผ่นให้ความอบอุ่นติดตั้งแม่เหล็กถาวรภายใน 6 ตัว เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กที่เป็น

เนื้อเดียวกันสำหรับการใช้งานสนามแม่เหล็ก

4. การทำงาน

4.1 ความปลอดภัย

⚠️ ข้อควรระวัง

- แผ่นให้ความอบอุ่นนี้มีการติดตั้งระบบความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ ที่ช่วยในการป้องกันความอบอุ่นสูงเกินไปทั่วทั้งพื้นผิวของแผ่นทำความอบอุ่น โดยทำการปิดอัตโนมัติในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด หากระบบความปลอดภัยปิดแผ่นให้ความอบอุ่น จอแสดงผลจะไม่เรืองแสงเมื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง
- โปรดทราบว่า ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย แผ่นให้ความอบอุ่นจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปหลังจากเกิดข้อผิดพลาด และ ต้องส่งแผ่นให้ความอบอุ่นนี้ไปยังศูนย์บริการลูกค้า
- ห้ามเชื่อมต่อแผ่นให้ความอบอุ่นที่ชำรุดกับตัวควบคุมอื่นที่เป็นประเภทคล้ายกัน มิฉะนั้นระบบความปลอดภัยจะทำการปิดเครื่องอย่างถาวร


4.2 การใช้งานเบื้องต้น

⚠️ ข้อควรระวัง

โปรดตรวจสอบว่าแผ่นให้ความอบอุ่นไม่ทับกัน หรือพักระหว่างการใช้งาน

- ขั้นแรกให้เชื่อมต่อตัวควบคุมอุณหภูมิเข้ากับแผ่นให้ความอบอุ่น โดยใส่ข้อต่อสำหรับเสียบเข้ากับแผ่นให้ความอบอุ่น
- จากนั้นเสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับ

4.3 การเปิดสวิตช์

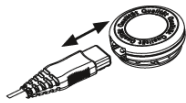

ในการเปิดใช้งานแผ่นให้ความอบอุ่น ให้ตั้งสวิตช์เลื่อนสำหรับเปิด / ปิด และ การตั้งค่าอุณหภูมิไปที่การตั้งค่า 1, 2 หรือ 3 จอแบบเรืองแสงสำหรับแสดงผลการตั้งค่าอุณหภูมิ จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง

4.4 การตั้งค่าอุณหภูมิ

ระดับ 0: ปิดเครื่อง

ระดับ 1: ทำความอบอุ่นระดับต่ำสุด

ระดับ 2: ทำความอบอุ่นระดับกลาง

ระดับ 3: ทำความอบอุ่นระดับสูงสุด

📌 หมายเหตุ

วิธีที่เร็วที่สุดในการอุ่นแผ่นความให้อบอุ่น คือตั้งค่าอุณหภูมิเป็นระดับสูงสุดใน

ตอนแรกที่เปิดใช้งาน

📌 หมายเหตุ สำหรับ HK 35, HK 63

แผ่นให้ความอบอุ่นเหล่านี้มีระบบทำความอบอุ่นอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วย

ให้ตัวแผ่นให้ความอบอุ่นเร็วขึ้นใน 10 นาทีแรก



⚠️ คำเตือน

หากมีการใช้แผ่นให้ความอบอุ่นนี้ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมง แนะนำให้ตั้งค่าตัวควบคุมอุณหภูมิที่ระดับต่ำสุด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อุณหภูมิร่างกายที่สัมผัสกับแผ่นให้ความอบอุ่นมีอุณหภูมิที่สูงเกินไป ซึ่งอาจทำให้ผิวหนังไหม้ได้

4.5 การปิดอัตโนมัติ

แผ่นให้ความอบอุ่นนี้มาพร้อมกับระบบปิดอัตโนมัติ ระบบนี้จะปิดแหล่งจ่ายความ

อบอุ่นทันที หลังจากใช้งานไปแล้วประมาณ 90 นาที จากนั้นหน้าจอแบบเรืองแสง

สำหรับแสดงผลการตั้งค่าอุณหภูมิจะเริ่มกะพริบไฟ เพื่อให้สามารถเปิดแผ่นให้

ความอบอุ่นได้อีกครั้ง โดยการเปิดใช้งานอีกครั้ง ต้องเลื่อนสวิตช์สำหรับเปิด / ปิด

และ ตั้งค่าอุณหภูมิ (5) ลงไปที่ค่า “ 0” (ปิด) ก่อน

ทิ้งไว้ประมาณ 5 วินาทีจึงจะสามารถเปิดได้อีกครั้ง



4.6 การปิดเครื่อง

การปิดแผ่นให้ความอบอุ่นนี้ ให้เลื่อนสวิตช์สำหรับเปิด / ปิด และ ตั้งค่าอุณหภูมิ

ไปที่ค่า “ 0” (ปิด) จอแบบเรืองแสงสำหรับแสดงผลการตั้งค่าอุณหภูมิ จะดับลง

📌 หมายเหตุ

หากไม่ได้ใช้งานแผ่นให้ความอบอุ่น ให้เลื่อนสวิตช์สำหรับเปิด / ปิด และ การตั้ง

ค่าอุณหภูมิไปที่ค่า “ 0” (ปิด) แล้วถอดปลั๊กไฟออกจากตัวรับ จากนั้นถอดตัว

ควบคุมอุณหภูมิออกจากแผ่นให้ความอบอุ่น โดยการถอดข้อต่อออกจากกัน

5. การทำความสะอาด และการเก็บรักษา

⚠️ คำเตือน

ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากตัวรับก่อนทุกครั้ง จากนั้นถอดข้อต่อ

ระหว่างตัวควบคุมอุณหภูมิออกจากแผ่นให้ความอบอุ่น

เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

⚠️ ข้อควรระวัง

ตัวควบคุมอุณหภูมิต้องไม่สัมผัสกับน้ำ หรือ ของเหลวอื่น ๆ เพราะอาจทำให้เกิด

ความเสียหายได้

- ในการทำความสะอาดตัวควบคุมอุณหภูมิ ให้ใช้ผ้าแห้งไม่เป็นขุย ห้ามใช้สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- รอยเล็ก ๆ บนแผ่นให้ความอบอุ่นสามารถขจัดออกได้ด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาด หากจำเป็นต้องใช้ของเหลวเล็กน้อย ให้ใช้น้ำยาซักฟอกแบบอ่อนโยน

⚠️ ข้อควรระวัง

โปรดทราบว่าแผ่นให้ความอบอุ่นนี้ไม่สามารถทำความสะอาดด้วยสารเคมี, บิด

หมาด, ปั่นแห้ง หรือรีดได้

- แผ่นให้ความอบอุ่นนี้สามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้
- ตั้งเครื่องซักผ้าให้มีรอบการซักแบบอ่อนโยนเป็นพิเศษที่อุณหภูมิ 30°C (ซักผ้าขนสัตว์) ใช้น้ำยาซักผ้าเนื้อละเอียดและดวงตามคำแนะนำของผู้ผลิต

⚠️ ข้อควรระวัง

โปรดทราบว่า การซักล้างแผ่นให้ความอบอุ่นบ่อยครั้ง จะส่งผลเสียต่อผลิตภัณฑ์

ดังนั้นควรซักล้างแผ่นให้ความอบอุ่นในเครื่องซักผ้าไม่เกิน 10 ครั้งในรอบอายุการ

ใช้งาน

- ทันทีที่นำออกจากเครื่องซักผ้า ควรจัดทรงแผ่นให้ความอบอุ่นขณะที่ยังเปียกอยู่ แล้วจึงนำไปผึ่งให้แห้ง

⚠️ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้หมุดหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน เพื่อแขวนแผ่นให้ความอบอุ่นกับราวตากผ้า มิฉะนั้น อาจทำอุปกรณ์เกิดความเสียหายได้
- อย่าเชื่อมต่อสวิตช์กับแผ่นให้ความอบอุ่น จนกว่าปลั๊กและแผ่นให้ความอบอุ่นจะแห้งสนิท มิฉะนั้น อุปกรณ์อาจเสียหายได้

⚠️ คำเตือน

ห้ามเปิดแผ่นให้ความอบอุ่นเพื่อทำให้แห้ง มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

6. การเก็บรักษา

หากคุณไม่ได้ใช้แผ่นให้ความอบอุ่นเป็นเวลานาน แนะนำให้เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์

เดิม และให้ถอดตัวควบคุมอุณหภูมิ และข้อต่อออกจากกัน

⚠️ ข้อควรระวัง

- ควรปล่อยให้อุปกรณ์เย็นลงก่อนการจัดเก็บ มิฉะนั้นแผ่นให้ความอบอุ่นอาจเกิดความเสียหายได้
- ห้ามวางวัตถุใด ๆ ไว้ด้านบนขณะที่กำลังจัดเก็บ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกดทับ หรือการบ่งของแผ่นให้ความอบอุ่น

7. การกำจัดสินค้าเมื่อหมดอายุการใช้งาน

ด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งอุปกรณ์ร่วมกับขยะในครัวเรือน

เมื่อหมดอายุการใช้งาน ให้ทิ้งเครื่องที่จุดรวบรวม หรือจุดรีไซเคิล



ในพื้นที่ที่เหมาะสม ควรทิ้งอุปกรณ์ตามข้อกำหนด EC - WEEE (ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์)

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบในการกำจัดขยะ

8. ถ้ามีปัญหาจะทำอย่างไร?

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
จอแบบเรืองแสงสำหรับแสดงผลการตั้งค่าอุณหภูมิไม่สว่างขึ้นในขณะที่ - ตัวควบคุมเชื่อมต่อกับแผ่นให้ความอบอุ่นอย่างถูกต้อง - ปลั๊กไฟหลักเชื่อมต่อกับเต้ารับที่ใช้งานได้ - สวิตช์เลื่อนถูกตั้งค่าเป็น 1, 2 หรือ 3	ระบบความปลอดภัยภัยปิดการใช้งาน แผ่นให้ความอบอุ่นอย่างถาวร	ส่งแผ่นให้ความอบอุ่น และตัวควบคุมอุณหภูมิให้กับผู้จัดจำหน่าย เพื่อซ่อมบำรุง

9. ข้อมูลทางเทคนิค

สังเกตตราประทับบนแผ่นให้ความอบอุ่น

10. การรับประกัน/บริการหลังการขาย

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Beurer") ให้การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์นี้โดยเป็นไปตามข้อกำหนด

ด้านล่างและตามขอบเขตที่อธิบายไว้ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการรับประกันด้านล่างจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระหน้าที่ในการ

รับประกันตามกฎหมายของผู้ขายซึ่งเกิดขึ้นจากข้อตกลงการขายกับผู้ซื้อ การ

รับประกันจะมีผลบังคับใช้โดยไม่กระทบต่อบทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับ

เกี่ยวกับความรับผิดใด ๆ

Beurer รับประกันการทำงานที่สมบูรณ์แบบและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์นี้ ระยะเวลาการรับประกันทั่วโลกคือ 3 ปีโดยเริ่มนับจากวันที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์

ใหม่ที่ยังไม่ถูกใช้งานจากผู้ขาย

การรับประกันใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อ ทำการซื้อในฐานะผู้บริโภค และ ใช้

เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลในบริบทของการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น อยู่

ภายใต้การใช้กฎหมายเยอรมัน

ในระหว่างระยะเวลาการรับประกันหากพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ไม่สมบูรณ์ หรือ มี

ข้อบกพร่องในการทำงาน ตามข้อกำหนดต่อไปนี้ ทาง Beurer จะดำเนินการ

ซ่อมแซม หรือจัดส่งเปลี่ยนใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขการรับประกัน

เหล่านี้

หากผู้ซื้อต้องการอ้างสิทธิ์การรับประกัน ควรติดต่อร้านค้าปลีกในพื้นที่ของตน เป็นอันดับแรก: ดูรายชื่อผู้ติดต่อจากรายการที่อยู่ผู้ให้บริการ "บริการระหว่างประเทศ" ที่แนบมา

จากนั้นผู้ซื้อจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเรียกร้องการรับประกัน

เช่น พวกเขาสามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ที่ไหนและต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การเรียกร้องการรับประกันจะได้รับการพิจารณาเมื่อผู้ซื้อติดต่อทาง Beurer

หรือคู่ค้าของ Beurer ที่ได้รับอนุญาต โดยใช้หลักฐานในการเรียกร้องดังนี้

- สำเนาใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จการซื้อและ

- ตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์ หรือ มีข้อบกพร่องในการทำงาน

รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในการรับประกัน:

- การเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานตามปกติ หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ตามปกติ

- อุปกรณ์เสริมที่หามาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เกิดการเสื่อมสภาพ หรือถูกใช้งานจนหมด (เช่น แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ผ้าพันแขน ซิล ซิวไฟฟ้า แหล่งกำเนิดแสง อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องพ่นยา)

- ผลิตภัณฑ์ที่ถูกทำความสะอาด จัดเก็บ หรือบำรุงรักษาอย่างไม่เหมาะสม

และ / หรือ ชัดต่อคู่มือการใช้งาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเปิด

ซ่อมแซม หรือแก้ไขโดยผู้ซื้อ หรือ โดยศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก

Beurer

- ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือ

ระหว่างการขนส่งไปยังศูนย์บริการ

- สินค้าที่ซื้อเป็นสินค้ามือสอง หรือเป็นสินค้าที่ถูกใช้งานแล้ว

- ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องที่ เกิดจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์

(อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ การเรียกร้องอาจเกิดขึ้นจากความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ หรือ ข้อกำหนดความรับผิดชอบตามกฎหมายบังคับอื่น ๆ)

กรณีที่มีการซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ จะไม่ขยายระยะเวลาการ

รับประกันไม่ว่าในกรณีใด ๆ

บริษัท เบลเมคส์ไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่ และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี 20110

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์: โทร. 098-280-5777, 038-314-118

สำนักงานกรุงเทพฯ: ร้านยาฮอสโปร (Hospro) : 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 065-503-6565